

Vorgeformte, abgerundete Spitze

Ideale Platzlösung

Mit nur 3 Klicks von 20 auf 65 cm



## Pocket Introducer

Introducer mit dem kleinsten möglichen Packmaß zur Vereinfachung der Intubation beim schwierigen Atemweg

# / Pocket Introducer

Pocket Introducer ist ein Hilfsmittel beim schwierigen Atemweg, um die direkte orotracheale Intubation oder Intubation via Videolaryngoskopie zu vereinfachen. Der 15 Fr Introducer mit vorgeformter Spitze und Zentimetermarkierungen lässt sich mit nur 3 Klicks von 20 auf 65 cm entfalten und ist somit innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

In gefaltetem Zustand bietet der Introducer das kleinstmögliche Packmaß und ist somit die ideale Platzlösung für Notfalltaschen, Helikopter, Arztkittel, Notfallschränke, etc.


## Anwendung



In gefaltetem Zustand misst der Pocket Introducer 20 cm.



Den Pocket Introducer aufklappen.

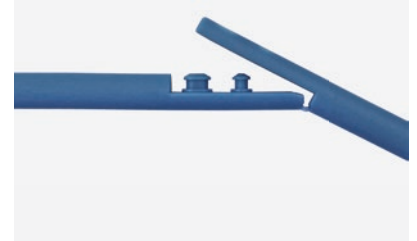

Die Klick-Verbindungen fest zusammendrücken.




Die Klick-Verbindungen sind dauerhaft und nicht wieder lösbar.



Gegebenenfalls das distale Ende vorformen.



Vorgeformte, abgerundete Spitze ist atraumatisch.

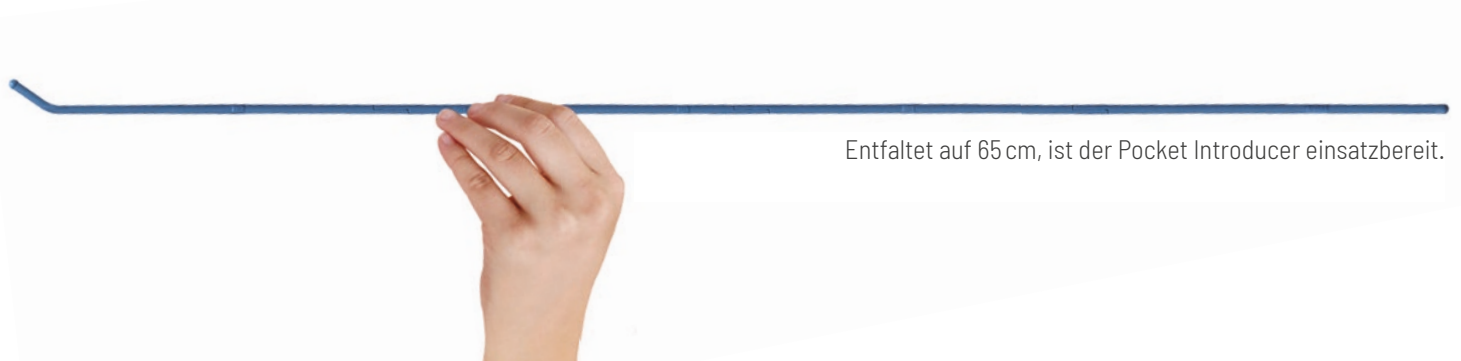

Entfaltet auf 65 cm, ist der Pocket Introducer einsatzbereit.

## Bestellinformation

**Pocket Introducer / Zum Einmalgebrauch, steril**

Größe	Länge	Zentimetermarkierungen	Für Trachealtubus	REF	Box
15 Fr	65 cm	10 bis 40 cm	≥ 6.0 mm I.D.	33-80-650-1	5

**Pocket Introducer / In robuster Kunststoffverpackung, zum Einmalgebrauch, steril**

Größe	Länge	Zentimetermarkierungen	Für Trachealtubus	REF	Box
15 Fr	65 cm	10 bis 40 cm	≥ 6.0 mm I.D.	33-81-650-1	1

## Zusatzinformation



Anwendungsvideo



Flyer Intubationshilfen



Kommentierte Bibliografie



Kunststoffverpackung

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.  
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.