

eFONA\* in CICO Situation

Alle Komponenten in einem Set

Kompaktes Packmaß




## Surgicric II

Set für die chirurgische Koniotomie entsprechend der klassischen chirurgischen Technik

# / Surgicric II

Surgicric II ist ein Set für die chirurgische Koniotomie entsprechend der klassischen chirurgischen Technik. Das Set ermöglicht eine Sicherung des Atemwegs im Falle einer Obstruktion der oberen Atemwege bzw. als „Ultima Ratio“, falls alle anderen Versuche den Patienten zu beatmen, gescheitert sind. Eine besondere Eigenschaft von Surgicric II ist die Kombination von Tubus und Dilatator. Der Dilatator ist bereits in den Tubus eingeführt, was eine schnelle und leichte Vorgehensweise erlaubt. In einer speziellen sterilen Instrumententasche verpackt, bietet das Set eine klare Übersicht über sämtliche Komponenten.

## Anwendung

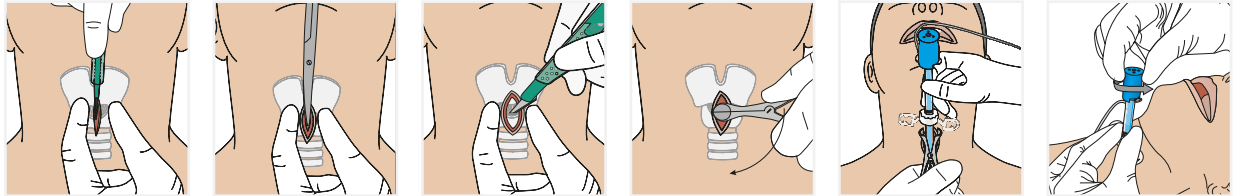

1. Vertikale Hautinzision

2. Stumpfe Präparation

3. Horizontale Inzision durch die Krikoidmembrane

4. Spekulum einführen und um 90° drehen

5. Tubus über das Spekulum in die Trachea einführen

6. Dilatator entriegeln und entfernen

## Eigenschaften

### Metzenbaum Schere

- Zur stumpfen Präparation bis zur Krikoidmembran

### Kilian Spekulum und Trachealhaken

- Um die Inzision offen zu halten

### Dilatator

- Weiche Spitze, um Verletzung der hinteren Trachealwand zu vermeiden
- Sanfter Übergang zwischen Dilatator und Tubusspitze
- Verriegelungsmechanismus minimiert die Gefahr einer versehentlichen Dislokation des Dilatators vom Tubus

### 6.0mm I.D. Tubus

- Cuff, zum Schutz vor Aspiration
- Verstellbarer Flansch
- Atraumatische, abgerundete Tubusspitze

### Verlängerungsschlauch

- Mit Absaugmöglichkeit ≤ 16 Fr

### Halsband

- Sichere Fixation des Tubus



### Inhalt

- 1 Skalpell # 11
- 2 Spritze 10 ml
- 3 6.0 mm I.D. Tubus mit Cuff und Dilatator
- 4 Halsband
- 5 Verlängerungsschlauch
- 6 Trachealhaken
- 7 Metzenbaum Schere
- 8 Kilian Spekulum

Robuste Verpackung und kompaktes Packmaß für Notfalltaschen, Rucksäcke, Notfallwagen, etc.

### Packmaß:

31.5 cm (L) x 15.2 cm (B) x 5.0 cm (H)

### Entfaltetes Maß / Steriles Feld:

56 cm (L) x 39 cm (B)

## Bestellinformation

Surgicric II / Zum Einmalgebrauch, steril

REF Box

30-08-117-1 1

## Zusatzinformation



Anwendungsvideo



Flyer Koniotomie



Kommentierte Bibliografie

\* emergency Front Of Neck Access

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.  
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.