




Intubationshilfen

Stilette / Introducer / Tubuswechsler

S-Guide

Formbare Intubationshilfe zum schwierigen Atemwegsmanagement

Eigenschaften

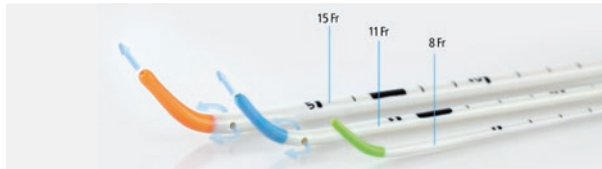

Weiche und atraumatische Spitze

- Vorgeformt
- Farbige:
 - Zur besseren Visualisierung innerhalb der glottischen Strukturen
 - Zur einfachen Größenerkennung

Oxygenierung* (11 Fr und 15 Fr)

- Drei Öffnungen am distalen Ende des S-Guide, um einen angemessenen Sauerstofffluss zu ermöglichen
- Wird mit zwei Arten von O₂ Konnektoren geliefert

Formbarkeit

- Formbarkeit und Steifigkeit, um den Trachealtubus vorzuformen und zu manövrieren
- Schwarze Markierung bei den Größen 11 Fr und 15 Fr zeigt die ideale Position zur Formung des Trachealtubus

Bestell-
information

S-Guide / Inklusive zwei O₂ Konnektoren (11Fr und 15Fr), zum Einmalgebrauch, steril

| Größe | Länge | Zentimetermarkierungen | Für Trachealtubus | REF | Box |
|-------|-------|------------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 8Fr | 40 cm | 5 bis 30 cm | ≥ 3.0 mm I.D. | 33-92-400-1 | 5 |
| 11Fr | 65 cm | 5 bis 40 cm | ≥ 4.5 mm I.D. | 33-91-650-1 | 5 |
| 15Fr | 65 cm | 5 bis 40 cm | ≥ 6.0 mm I.D. | 33-90-650-1 | 5 |

*Oxygenierung ist möglich mit den Größen 11 Fr und 15 Fr. Oxygenierung ist nicht möglich mit der Größe 8 Fr.

Zusatz-
information

Anwendungsvideo



Prospekt



Anwendungsempfehlung



Kommentierte Bibliografie

/ i-Bougie

Der vielseitige Introducer zur Vereinfachung der Intubation beim schwierigen Atemweg

Eigenschaften




Atraumatische distale Spitze

- Abgerundetes und abgewinkeltes Design mit seitlichen Öffnungen



Oxygenierung

- Ermöglicht Sauerstofffluss durch die seitlichen Öffnungen an der distalen Spitze
- Wird mit zwei Arten von O₂ Konnektoren geliefert

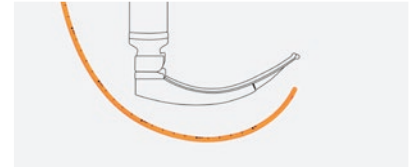

Formbarkeit

- Material ermöglicht das Formen des i-Bougie
- Zentimetermarkierungen von 5 bis 40 cm
- Geringe Reibungsfläche zum einfachen Einführen des Trachealtubus



Bestell-
information

i-Bougie / Inklusive zwei O₂ Konnektoren, zum Einmalgebrauch, steril

| Größe | Länge | Zentimetermarkierungen | Für Trachealtubus | REF | Box |
|-------|-------|------------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 14 Fr | 70 cm | 5 bis 40 cm | ≥ 6.0 mm I.D. | 33-70-700-1 | 5 |

Zusatz-
information



Anwendungsvideo



Prospekt



Kommentierte Bibliografie

X-Changer

Tubuswechsler zur Aufrechterhaltung des Atemwegs während Trachealtubuswechsel




Eigenschaften




Weiche und atraumatische Spitze

- Stumpfe Spitze ist flexibel und atraumatisch
- Farbkodiert, zur einfachen Größenerkennung

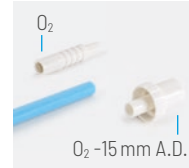

Oxygenierung

- Hohler Katheter mit lateralen Öffnungen, um Sauerstoff zu verabreichen
- Wird mit zwei Arten von O₂ Konnektoren geliefert

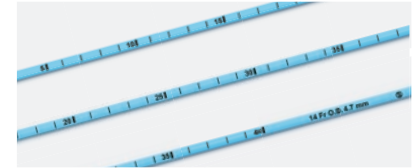

Zentimetermarkierungen

- Dienen zur sicheren Bestimmung der Einführtiefe
- Ermöglichen die korrekte Ausrichtung mit dem Trachealtubus

3 mm



Length 80 cm

VBM

CE 0123

Bestell-
information**X-Changer** / Inklusive zwei O₂ Konnektoren, zum Einmalgebrauch, steril

| Größe | Länge | Zentimetermarkierungen | Für Trachealtubus | REF | Box |
|-------|-------|------------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 11Fr | 80 cm | 5 bis 40 cm | ≥ 4.0 mm I.D. | 33-42-800-1 | 5 |
| 14Fr | 80 cm | 5 bis 40 cm | ≥ 5.0 mm I.D. | 33-41-800-1 | 5 |
| 19Fr | 80 cm | 5 bis 40 cm | ≥ 7.0 mm I.D. | 33-40-800-1 | 5 |

Zusatz-
information

Anwendungsvideo




Prospekt



Kommentierte Bibliografie


/ Pocket Introducer

Introducer mit dem kleinsten möglichen Packmaß zur Vereinfachung der Intubation beim schwierigen Atemweg

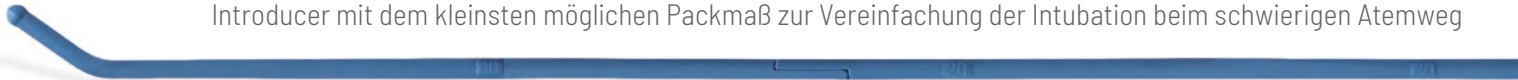


Spitze

- Vorgeformte, abgerundete Spitze ist atraumatisch
- Distales Ende ist formbar

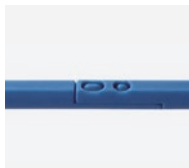

Klick-Verbindungen

- Gefaltet auf 20 cm werden mit nur 3 Klicks 65 cm
- Klick-Verbindungen sind dauerhaft und nicht wieder lösbar
- Zentimetermarkierungen von 10 bis 40 cm

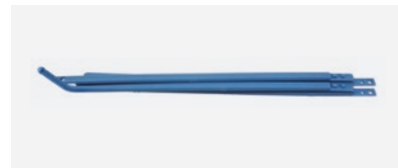

Kleinstmögliches Packmaß

- Ideale Platzlösung für Notfalltaschen, Helikopter, Arztkittel, Notfallschränke, etc.
- Einsatzbereit innerhalb weniger Sekunden



Bestell-
information

Pocket Introducer / Zum Einmalgebrauch, steril

| Größe | Länge | Zentimeter- markierungen | Für Trachealtubus | REF | Box |
|-------|-------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 15Fr | 65 cm | 10 bis 40 cm | ≥ 6.0 mm I.D. | 33-80-650-1 | 5 |

Pocket Introducer / In robuster Kunststoffverpackung, zum Einmalgebrauch, steril

| Größe | Länge | Zentimeter- markierungen | Für Trachealtubus | REF | Box |
|-------|-------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 15Fr | 65 cm | 10 bis 40 cm | ≥ 6.0 mm I.D. | 33-81-650-1 | 1 |

Zusatz-
information



Anwendungsvideo



Kommentierte Bibliografie



Kunststoffverpackung

/ Einführungsmandrin

Intubationsstilett ermöglicht das Vorformen des Trachealtubus



Eigenschaften

Spitze

- Weiche, atraumatische Spitze

Versionen

- Ohne Silikonkonnektor
- Mit verschiebbarem Silikonkonnektor, der die Fixierung des Trachealtubus ermöglicht

Bestell-
information**Einführungsmandrin / Wiederverwendbar**

| Größe | Länge | A.D. | Für Trachealtubus | Ohne Silikonkonnektor | Box | Mit verschiebbarem Silikonkonnektor (15 mm I.D.) | Box |
|--------|-------|--------|--------------------|--------------------------|-----|---|-----|
| Klein | 34 cm | 2.0 mm | 2.5 – 3.5 mm I.D. | REF 90-10-111 | 25 | REF 90-10-001 | 10 |
| Mittel | 38 cm | 3.0 mm | 4.0 – 4.5 mm I.D. | REF 90-10-222 | 25 | REF 90-10-002 | 10 |
| Groß | 45 cm | 4.0 mm | 5.0 – 6.5 mm I.D. | REF 90-10-333 | 25 | REF 90-10-003 | 10 |
| Groß | 45 cm | 5.5 mm | 7.0 – 11.0 mm I.D. | REF 90-10-444 | 25 | REF 90-10-004 | 10 |

Zusatz-
information

Kommentierte Bibliografie

Zusatzinformation



Für die komplette Produktpalette besuchen Sie bitte unsere Website **www.vbm-medical.de**

Hier finden Sie unsere Mediathek mit zusätzlichen Informationen wie Anwendungsvideos, Prospekte, Flyer, etc.

Die Medizinprodukte in diesem Werbemittel sind hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Die Medizinprodukte in diesem Werbemittel enthalten keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

VBM **Medizintechnik GmbH**

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Folgen Sie uns auf:



CE 0123

FLY013_6.0_DE