




Dispositivos de intubación

Estiletos / Introdutores / Intercambiador de tubo

S-Guide

Guía de intubación maleable para la vía aérea difícil

Características

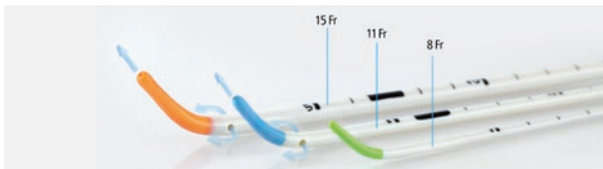

Punta blanda y atraumática

- Premoldeada
- De color:
 - Para una mejor visualización dentro de las estructuras glóticas
 - Para una identificación fácil de los tamaños

Oxigenación* (11Fr y 15Fr)

- Tres orificios en el extremo distal de la S-Guide para permitir un flujo de oxígeno adecuado
- Suministrado con dos diferentes conectores de oxígeno

Maleabilidad

- Flexibilidad y rigidez para dar forma y para maniobrar el tubo traqueal
- La marca negra en los tamaños 11Fr y 15Fr indica la posición ideal para dar forma al tubo traqueal

Informaciones de pedido

S-Guide / Incluye dos tipos de conectores de O₂ (11Fr y 15Fr), de un solo uso, estéril

Tamaño	Longitud	Marcas de centímetros	Para tubo traqueal	REF	Box
8Fr	40 cm	5 a 30 cm	≥ 3.0 mm D.I.	33-92-400-1	5
11Fr	65 cm	5 a 40 cm	≥ 4.5 mm D.I.	33-91-650-1	5
15Fr	65 cm	5 a 40 cm	≥ 6.0 mm D.I.	33-90-650-1	5

*La oxigenación es posible con los tamaños 11 Fr y 15 Fr. La oxigenación no es posible con el tamaño 8 Fr.

Informaciones adicionales



Video explicativo



Folleto



Recomendaciones de uso



Bibliografía comentada

/ i-Bougie

El Introducitor versátil para facilitar la intubación difícil

Características




Punta distal atraumática

- Diseño con punta redondeada, curvada y con orificios laterales




Oxigenación

- Permite el flujo de oxígeno a través de los orificios laterales en la punta distal
- Suministrado con dos diferentes conectores de oxígeno

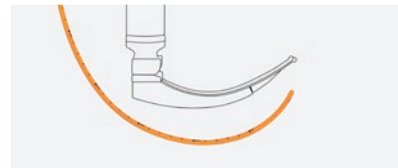

Moldeabilidad

- Material permite moldear el i-Bougie
- Marcas de centímetros de 5 a 40 cm
- Superficie de baja fricción para fácil deslizamiento del tubo traqueal

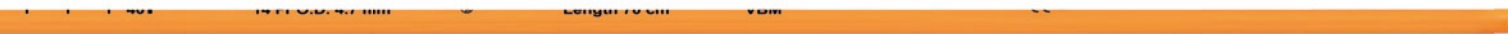

Informaciones
de pedido

i-Bougie / Incluye dos tipos de conectores de O₂, de un solo uso, estéril

Tamaño	Longitud	Marcas de centímetros	Para tubo traqueal	REF	Box
14Fr	70 cm	5 a 40 cm	≥ 6.0 mm D.I.	33-70-700-1	5

Informaciones
adicionales



Vídeo explicativo



Folleto



Bibliografía comentada

X-Changer

Intercambiador de tubo para mantener la vía aérea durante el cambio del tubo traqueal




Características



Punta blanda y atraumática

- La punta roma es flexible y atraumática
- Código de color para una identificación fácil de los tamaños

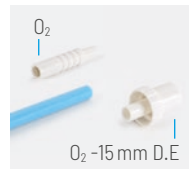

Oxigenación

- Guía hueca con aperturas laterales para suministrar oxígeno
- Suministrado con dos diferentes conectores de oxígeno



Marcas de centímetros

- Sirven para determinar con seguridad la profundidad de inserción
- Permiten la alineación correcta con el tubo traqueal

3 mm



Length 80 cm

VBM

CE 0123

Informaciones de pedido

X-Changer / Incluye dos tipos de conectores de O₂, de un solo uso, estéril

Tamaño	Longitud	Marcas de centímetros	Para tubo traqueal	REF	Box
11Fr	80 cm	5 a 40 cm	≥ 4.0 mm D.I.	33-42-800-1	5
14Fr	80 cm	5 a 40 cm	≥ 5.0 mm D.I.	33-41-800-1	5
19Fr	80 cm	5 a 40 cm	≥ 7.0 mm D.I.	33-40-800-1	5

Informaciones adicionales



Video explicativo



Folleto



Bibliografía comentada

/ Pocket Introducer

Introductor con el embalaje más pequeño para facilitar una intubación difícil




Punta

- La punta preformada y redondeada es atraumática
- El extremo distal es maleable



Conexiones de clic

- Plegado en 20 cm, desplegado en 65 cm con solo 3 clics
- Las conexiones de clic son permanentes y no se pueden volver a separar
- Marcas de centímetros de 10 a 40 cm

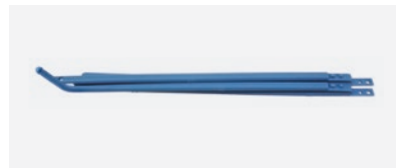

El envase más pequeño

- Solución de espacio ideal para bolsas de emergencia, helicópteros, batas de médicos, carros de emergencia, etc.
- Listo para el uso en segundos



Informaciones de pedido

Pocket Introducer / De un solo uso, estéril

Tamaño	Longitud	Marcas de centímetros	Para tubo traqueal	REF	Box
15Fr	65cm	10 a 40 cm	≥ 6.0mm D.I.	33-80-650-1	5

Pocket Introducer / En un envase de plástico rígido, de un solo uso, estéril

Tamaño	Longitud	Marcas de centímetros	Para tubo traqueal	REF	Box
15Fr	65cm	10 a 40 cm	≥ 6.0mm D.I.	33-81-650-1	1

Informaciones adicionales



Video explicativo




Bibliografía comentada



Plástico rígido

/ Estilete

El estilete de intubación permite preformar el tubo traqueal

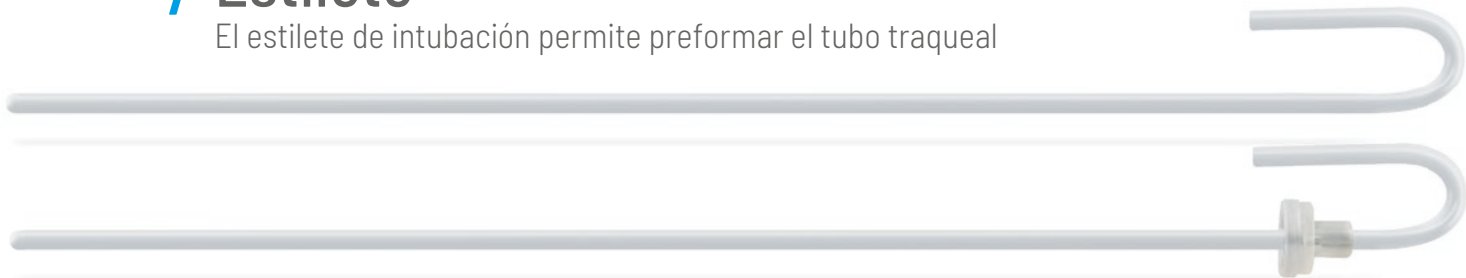

Características

Punta

- Punta blanda y atraumática

Versiones

- Sin conector de silicona
- Con conector de silicona ajustable, que permite la fijación del tubo traqueal

Informaciones
de pedido

Estilete / Reutilizable

Tamaño	Longitud	D.E.	Para tubo traqueal	Sin conector de silicona	Box	Con conector de silicona ajustable (15 mm D.I.)	Box
Pequeño	34 cm	2.0 mm	2.5-3.5 mm D.I.	REF 90-10-111	25	REF 90-10-001	10
Mediano	38 cm	3.0 mm	4.0-4.5 mm D.I.	REF 90-10-222	25	REF 90-10-002	10
Grande	45 cm	4.0 mm	5.0-6.5 mm D.I.	REF 90-10-333	25	REF 90-10-003	10
Grande	45 cm	5.5 mm	7.0-11.0 mm D.I.	REF 90-10-444	25	REF 90-10-004	10

Informaciones
adicionales



Bibliografía comentada

Informaciones
adicionales



Para más información sobre nuestra gama completa de productos visite nuestra página web **www.vbm-medical.de**
Ahí encontrarán nuestra mediateca con informaciones adicionales como videos, folletos, flyer, etc.

Los productos médicos en este material publicitario son fabricados sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.
Los productos médicos en este material publicitario no contienen ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.

VBM **Medizintechnik GmbH**

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Síguenos en Redes Sociales:

