



## Tourniquet Systeme

Tourniquet Geräte mit Manschetten und Zubehör

# / Tourniquet Touch TT20 / TT15



Das Tourniquet Touch ist ein elektrisch betriebenes Blutsperregerät. Es reguliert den Druck einer Blutsperremanschette, welche vorübergehend den Blutfluss der oberen oder unteren Extremität eines Patienten verschließt, um ein blutleeres Feld zu erhalten. Nutzerfreundliche Innovationen wie die Schnellwahltasten oder das spezielle Alarmsystem vereinfachen die Gerätenutzung und sorgen für Patientensicherheit. Die Systemoberfläche ist zuverlässig und intuitiv und erlaubt eine einfache Wartung für den Servicetechniker (Kalibrierung, Selbsttest, Dichtigkeitstest). Die integrierte Lithium-Ionen Batterie ermöglicht eine Backup Laufzeit von ca. 8 h.

## **Tourniquet Touch TT20 mit zwei Manschettenkanälen**

Für die Anwendung mit Einfachmanschette, zwei Einfachmanschetten oder Doppelmanschette.

## **Tourniquet Touch TT15 mit Manschettenkanal und Spülkanal**

Für die Anwendung mit Einfachmanschette und Druckinfusionsmanschette.

Bestell-  
information

**Tourniquet Touch TT20** / Mit 3.0 m Spiral-Verbindungsschlauch (blau und rot), 100 - 240 VAC, Höhe 186 mm, Breite 263 mm, Tiefe 226 mm, 4.5 kg

REF	Box
-----	-----

01-20-000	1
-----------	---

**Tourniquet Touch TT15** / Mit 3.0 m Spiral-Verbindungsschlauch (blau und schwarz), 100 - 240 VAC, Höhe 186 mm, Breite 263 mm, Tiefe 226 mm, 4.5 kg

REF	Box
-----	-----

01-15-000	1
-----------	---

**Stativ mit Korb** / 4 Rollen mit Feststeller (2 davon elektrisch leitfähig), Höhe 939 mm, Breite 400 mm, Tiefe 400 mm, 8.2 kg

REF	Box
-----	-----

01-00-100	1
-----------	---

Zusatz-  
information

Anwendungsvideo



Prospekt

# / Tourniquet Dispo Cuff









Blutsperremanschette, zum Einmalgebrauch






Tourniquet Dispo Cuff ist eine sterile Blutsperremanschette zum Einmalgebrauch, die sich besonders für kontaminierte Anwendungen eignet und Schutz vor nosokomialer Infektion bietet. Die Manschette ist erhältlich in gerader Form (für kleine oder mittlere obere Extremitäten) und in konischer Form (hauptsächlich für konische, untere Extremitäten) und wird in verschiedenen Größen angeboten, die zur optimalen Manschettenauswahl farbkodiert sind.



Bestell-  
information**Tourniquet Dispo Cuff** / Einfachmanschette, zum Einmalgebrauch,  
steril

Länge	Breite	Farbe	REF	Box
20 cm	5 cm	-	20-34-700SLZ-1	10
30 cm	6 cm		20-34-710SLZ-1	10
35 cm	8 cm		20-34-711SLZ-1	10
46 cm	10 cm		20-34-712SLZ-1	10
46 cm	12 cm		20-34-715SLZ-1*	10
61 cm	12 cm		20-34-722SLZ-1*	10
76 cm	12 cm		20-34-727SLZ-1*	10
86 cm	12 cm		20-34-728SLZ-1*	10
107 cm	12 cm		20-34-729SLZ-1*	10

**Tourniquet Dispo Cuff** / Doppelmanschette, zum Einmalgebrauch,  
steril

Länge	Breite	Farbe	REF	Box
30 cm	12 cm		20-30-710SLZ-1	10
46 cm	15 cm		20-30-712SLZ-1	10
61 cm	15 cm		20-30-722SLZ-1	10

\*Konische Form

**Verlängerungsschlauch** / Zum Einmalgebrauch, steril

Länge	REF	Box
100 cm	20-39-100-1	5

Zusatz-  
information

Anwendung am Arm



Anwendung am Bein



Prospekt

# / Tourniquet Wipe Cuff










Blutsperremanschette, wiederverwendbar durch manuelle Wischdesinfektion






Tourniquet Wipe Cuff ist eine wiederverwendbare Blutsperremanschette aus strapazierfähigem Material und ist geeignet zur wiederholten Anwendung nach Wischdesinfektion. Die Manschette ist erhältlich in gerader Form (für kleine oder mittlere obere Extremitäten) und in konischer Form (hauptsächlich für konische, untere Extremitäten) und wird in verschiedenen Größen angeboten, die zur optimalen Manschettenauswahl farbkodiert sind. UDI-Code und Seriennummer ermöglichen Rückverfolgbarkeit des Produktes und Nachverfolgung der Anwendungen.



Bestell-  
information**Tourniquet Wipe Cuff / Einfachmanschette, wiederverwendbar**

Länge	Breite	Farbe	REF	Box
20 cm	7 cm		20-75-700	1
30 cm	8 cm		20-75-710	1
35 cm	8 cm		20-75-711	1
46 cm	10 cm		20-75-712	1
46 cm	12 cm		20-75-715*	1
61 cm	12 cm		20-75-722*	1
76 cm	12 cm		20-75-727*	1
86 cm	12 cm		20-75-728*	1
107 cm	12 cm		20-75-729*	1

**Tourniquet Wipe Cuff / Doppelmanschette, wiederverwendbar**

Länge	Breite	Farbe	REF	Box
30 cm	12 cm		20-77-710	1
46 cm	15 cm		20-77-712	1
61 cm	15 cm		20-77-722	1

\*Konische Form

Zusatz-  
information

Anwendung am Arm



Anwendung am Bein




Prospekt

# / Tourniquet Silicone Cuff

Blutsperremanschette, wiederverwendbar durch maschinelle Aufbereitung





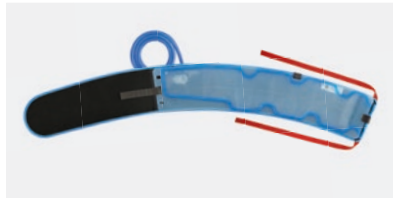




Tourniquet Silicone Cuff ist eine wiederverwendbare Blutsperremanschette aus langlebigem, strapazierfähigem Material und für die wiederholte Anwendung nach Sterilisation im Dampfautoklaven bei einer Temperatur von 134°C für 5 Minuten geeignet. Die Manschette ist erhältlich in gerader Form (für kleine oder mittlere obere Extremitäten) und in konischer Form (hauptsächlich für konische, untere Extremitäten) und wird in verschiedenen Größen angeboten, die zur optimalen Manschettenauswahl farbkodiert sind. UDI-Code und Seriennummer ermöglichen Rückverfolgbarkeit des Produktes und Nachverfolgung der Anwendungen.






Bestell-  
information

**Tourniquet Silicone Cuff /** Einfachmanschette, wiederverwendbar, autoklavierbar

Länge	Breite	Farbe	REF	Box
20 cm	2.5 cm	-	20-64-700	1
30 cm	4.5 cm		20-64-710	1
35 cm	7 cm		20-64-611	1
46 cm	8.5 cm		20-64-612	1
46 cm	11 cm		20-64-512*	1
61 cm	11 cm		20-64-522*	1
76 cm	11 cm		20-64-527*	1
86 cm	11 cm		20-64-528*	1

**Tourniquet Silicone Cuff /** Doppelmanschette, wiederverwendbar, autoklavierbar

Länge	Breite	Farbe	REF	Box
30 cm	8 cm		20-60-710	1
46 cm	12.5 cm		20-60-712	1
61 cm	12.5 cm		20-60-722	1

\*Konische Form

**Verschlusskappe /** Für Tourniquet Silicone Cuff, wiederverwendbar

REF	Box
22-60-111	5

Zusatz-  
information

Anwendung am Arm



Anwendung am Bein



Prospekt

# / Maßband


Zur Auswahl von VBM Tourniquet Manschetten

- Farbkodierung zur einfachen Bestimmung der Manschettengröße

Bestell-  
information

**Maßband** / Zum Einmalgebrauch

REF	Box
20-95-222	50

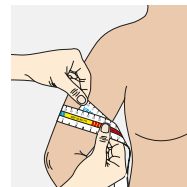

# / Tourniquet Sleeve


Zum Patientenschutz

- Schützt das weiche Gewebe unter der Manschette
- Reduziert Faltenbildung, Einklemmen und Scherkräfte auf das weiche Gewebe

Bestell-  
information

**Tourniquet Sleeve** / Zum Einmalgebrauch

Extremität	Farbe	Rein verpackt	Steril verpackt	Box
13 - 18 cm	<input type="checkbox"/>	REF 23-00-700	REF 23-00-700-1	10
18 - 27 cm	<input type="checkbox"/>	REF 23-00-710	REF 23-00-710-1	10
25 - 32 cm	<input type="checkbox"/>	REF 23-00-711	REF 23-00-711-1	10
32 - 43 cm	<input type="checkbox"/>	REF 23-00-712	REF 23-00-712-1	10
43 - 57 cm	<input type="checkbox"/>	REF 23-00-722	REF 23-00-722-1	10
57 - 69 cm	<input type="checkbox"/>	REF 23-00-727	REF 23-00-727-1	10
69 - 79 cm	<input type="checkbox"/>	REF 23-00-728	REF 23-00-728-1	10
79 - 100 cm	<input type="checkbox"/>	REF 23-00-729	REF 23-00-729-1	10

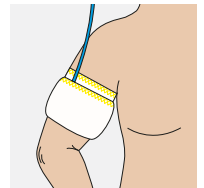

# / Tourniquet Drape



Zum Patientenschutz

- Isoliert die Manschette vom sterilen Feld
- Schutz gegen Ansammlung von Flüssigkeiten unter der Manschette, um den Patienten vor Verbrennungen in Verbindung mit Antiseptikum zu schützen

Bestell-  
information

**Tourniquet Drape** / Zum Einmalgebrauch

Extremität	Rein verpackt	Box	Steril verpackt	Box
18 - 45 cm	REF 24-00-100	40	REF 24-00-100-1	10
40 - 80 cm	REF 24-00-200	40	REF 24-00-200-1	10

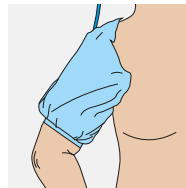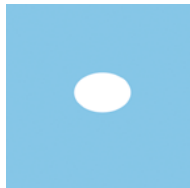

# / Cuff Cover

Zum Manschettenschutz

- Schützt die Manschette vor Verschmutzung

Bestell-  
information

**Cuff Cover** / Zum Einmalgebrauch

Extremität	Größe	Rein verpackt	Steril verpackt	Box
18-43 cm	Klein	REF 20-11-111	REF 20-11-111-1	50
40-61cm	Mittel	REF 20-11-333	REF 20-11-333-1	50
58-81 cm	Groß	REF 20-11-222	REF 20-11-222-1	50



# / Esmarch Bandagen

Zur Blutentleerung

- In 4 Größen erhältlich
- Aus synthetischem Gummi und talkumfrei, um mögliche allergische Reaktionen zu verhindern
- Strukturierte Oberfläche für einen guten Halt
- Elastische Eigenschaften für ein einfaches Auswickeln
- Robust und reißfest


Bestell-  
information

**Esmarch Bandage** / Zum Einmalgebrauch,  
steril verpackt, Farbe: hellblau

Breite	Länge	REF	Box
6 cm	365 cm	20-21-060-1	10
8 cm	365 cm	20-21-080-1	10
10 cm	365 cm	20-21-100-1	10
15 cm	365 cm	20-21-150-1	10

**Esmarch Bandage** / Wiederverwendbar,  
autoklavierbar, Farbe: dunkelblau

Breite	Länge	REF	Box
6 cm	500 cm	20-20-060	5
8 cm	500 cm	20-20-080	5
10 cm	500 cm	20-20-100	5
15 cm	500 cm	20-20-150	5

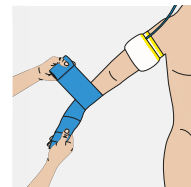






# / Rollmanschette


Zur Blutentleerung

- Ermöglicht eine einfache und schnelle Blutentleerung innerhalb weniger Sekunden
- Belüftbares Blutentleerungssystem
- 100% medizinisch eingestuftes Silikon
- Schnelle und effiziente Vorgehensweise
- Komplette Palette an verfügbaren Größen

Bestell-  
information

**Rollmanschette** / Wiederverwendbar

Größe	Extremität	Farbe	REF	Box
2	26 - 33 cm		21-95-712	1
3	31 - 40 cm		21-95-719	1
4	38 - 49 cm		21-95-722	1
5	47 - 60 cm		21-95-727	1
6	58 - 70 cm		21-95-729	1

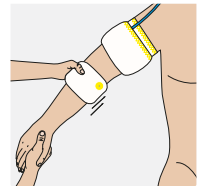

# / Druckinfusionsmanschetten

Verabreichung großer Flüssigkeitsmengen zur Spülung des Operationsfeldes



## Classic Infusor

Mit Reißverschluss zum Einlegen unterschiedlicher Passformen von Flüssigkeitsbeutel.



## Clear Infusor

Klare 360° Sicht auf Flüssigkeitsbeutel und Flüssigkeitsstand.



## Dispo Infusor

Mit Haken, zur einfachen Fixierung gängiger Flüssigkeitsbeutel.

Bestell-  
information**Classic Infusor /** Wiederverwendbar

Ausführung	3000 / 5000 ml	Box
Mit Handgebläse, Dreiwegehahn und Manometer	REF 58-08-300	1
Mit Luer Lock Anschluss	REF 58-01-300	1



Anwendungsvideo



Prospekt

500 ml und 1000 ml auf Anfrage erhältlich

**Clear Infusor /** Wiederverwendbar

Ausführung	3000 ml	Box
Mit Handgebläse, Dreiwegehahn und Manometer	REF 57-08-300	1
Mit Luer Lock Anschluss	REF 57-01-300	1



Anwendungsvideo



Prospekt

500 ml und 1000 ml auf Anfrage erhältlich

**Dispo Infusor /** Zum Einpatientengebrauch

Ausführung	3000 ml	Box
Mit Handgebläse, Dreiwegehahn und farbkodierter Druckanzeige	REF 56-02-300	5
Mit Luer Lock Anschluss	REF 56-01-300	5



Anwendungsvideo



Prospekt

500 ml und 1000 ml auf Anfrage erhältlich

# / Manuelles Tourniquet



Das manuelle Tourniquet reguliert den Druck einer Tourniquet Manschette, welche vorübergehend den Blutfluss der oberen oder unteren Extremität verschließt, um ein blutleeres Feld zu erzeugen.

Das Handgebläse mit Manometer ermöglicht einen autonomen Einsatz ohne Strom- und Druckluftanschluss.

**Manuelles Tourniquet / Handgebläse mit Manometer, Druckbereich bis 600mmHg**

**Mit blauem Spiral-Verbindungsschlauch  
und Schnellverschlusskupplung**

**Mit rotem Spiral-Verbindungsschlauch  
und Schnellverschlusskupplung**

**Box**

REF 20-18-601

REF 20-18-602

1



Zusatz-  
information



Für die komplette Produktpalette besuchen Sie bitte unsere Website [www.vbm-medical.de](http://www.vbm-medical.de).  
Hier finden Sie unsere Mediathek mit zusätzlichen Informationen wie Anwendungsvideos, Prospekte, Flyer, etc.

Die Medizinprodukte in diesem Werbemittel sind hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.  
Die Medizinprodukte in diesem Werbemittel enthalten keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**VBM** **Medizintechnik GmbH**

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: [sales@vbm-medical.de](mailto:sales@vbm-medical.de) / [www.vbm-medical.de](http://www.vbm-medical.de)

Folgen Sie uns auf:



CE / CE 0123

FLY016\_3.0\_DE