


Accesorios para Anestesia & Cuidados Intensivos



Fijaciones para tubos / Tubos de respiración / Accesorios para ventilación
Tubos corrugados / Conectores / Tubos de silicona / Infusión a presión
Soportes / Conectores de tubos

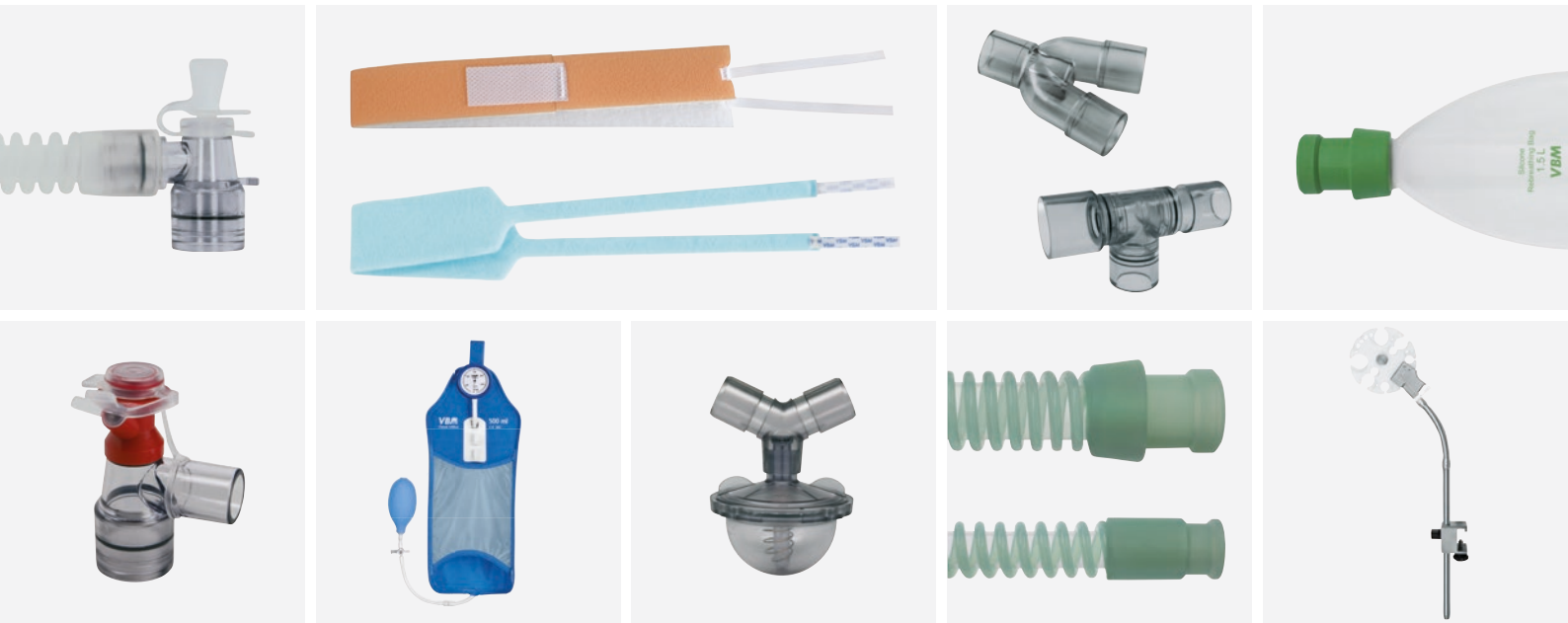

Para más información sobre nuestra gama completa de productos visite nuestra página web www.vbm-medical.de
Ahí encontrarán nuestra mediateca con informaciones adicionales como videos, folletos, etc.

Advertencia:

Este material publicitario contiene información sobre la gama completa de los productos médicos de VBM. Para confirmar si un producto está disponible o registrado, rogamos contactar con el representante de VBM.

Los productos médicos en este catálogo son fabricados sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario. Los productos médicos en este catálogo no contienen ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.

	Fijaciones para tubos
Collarines de traqueostomía	Página 4 – 5
Endotape	
Fijador de tubo	
Mordedor	
	Tubos de respiración
Tubo de respiración para adultos	Página 6
Tubos de respiración para niños	
	Accesorios para ventilación
Circuito de anestesia para niños	Página 7
Bolsas reservorio	
Trampas de agua	
	Tubos corrugados
Tubos corrugados, reutilizable	Página 8 – 9
Tubo de conexión	
Tubos corrugados, de un solo uso	
	Conectores
Conectores rectos	Página 10 – 14
Conectores en ángulo recto	
Tube Inhaler	
Conectores acodados	
Conectores en Y	
Conectores en Y para niños	
Conectores en T	
Tubos de conexión para niños	
	Tubo de silicona
Tubo de silicona	Página 15
	Infusión a presión
Classic Infusor	Página 16 – 19
Clear Infusor	
Dispo Infusor	
	Soportes
Soporte con tubo flexible	Página 20 – 21
Soporte con tres articulaciones	
Tube-Tray	
Soporte para transductores de presión	
	Conectores de tubos
Conectores con cierre rápido	Página 22
Conectores Luer Lock	

/ Collarines de traqueostomía

Fijación de tubo para pacientes con traqueostomía

Informaciones de pedido

Collarín de traqueostomía / De un solo uso, color: azul

Paciente	Longitud	REF	Box
Bebé / Niño	355 mm	40-0005-011	10
Niño / Adulto	475 mm	40-0005-033	10
Adulto, extra largo	525 mm	40-0005-044	10



Collarín de traqueostomía / De un solo uso, color: beige

Paciente	Longitud	REF	Box
Bebé / Niño	340 mm	40-0008-011	10
Niño / Adulto	490 mm	40-0008-033	10
Adulto, extra largo	590 mm	40-0008-044	10



Collarín de traqueostomía, ajustable / De un solo uso, color: beige

Paciente	Longitud	REF	Box
Niño / Adulto	400 mm	40-0066-033	10



/ Endotape

Fijación oral/nasal de tubo traqueal

Informaciones de pedido

Endotape / Con cintas elásticas, cubiertas con silicona, de un solo uso, color: beige

Paciente	Longitud	REF	Box
Niño / Adulto	540 mm	40-8018-044*	10



* Contiene o presenta látex de caucho natural

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo

/ Fijador de tubo

Fijación oral/nasal de tubo traqueal

Informaciones de pedido

Fijador de tubo / De un solo uso, color: beige

Paciente	Longitud	REF	Box
Niño / Adulto	540 mm	40-8010-033	10
Adulto	650 mm	40-8010-044	10



Informaciones adicionales



Vídeo explicativo

/ Mordedor


Fijación oral para tubo traqueal, Tubo Laríngeo y mascarilla laríngea

El tubo es insertado dentro del mordedor evitando así la oclusión.

Informaciones de pedido

Mordedor / De un solo uso, estéril

Longitud	Tubo traqueal	Tubo Laríngeo	Mascarilla Laríngea	Mordedor	Mordedor con cinta elástica	Box
4	6.5 - 8.0 mm D.I.	-	2, 2.5	REF 40-60-040-1	REF 40-66-040-1	20
5	8.5 - 11.0 mm D.I.	2, 2.5	-	REF 40-60-050-1	REF 40-66-050-1	20
6	-	3, 4, 5	3, 4, 5	REF 40-60-060-1	REF 40-66-060-1	20

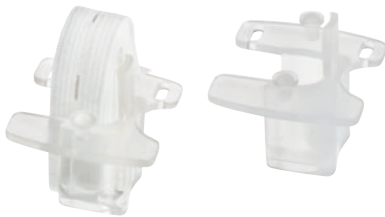


Tubo de respiración 19 mm D.I. para adultos

Reutilizable

Informaciones de pedido

Conectores vulcanizados de 22 mm D.I. en ambos extremos /

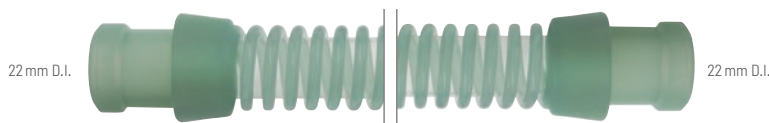


Longitud	Color: verde	Box	Longitud	Color: verde	Box	Longitud	Color: verde	Box
30 cm	REF 66-22-030	1	90 cm	REF 66-22-090	1	180 cm	REF 66-22-180	1
40 cm	REF 66-22-040	1	110 cm	REF 66-22-110	1	200 cm	REF 66-22-200	1
60 cm	REF 66-22-060	1	130 cm	REF 66-22-130	1			
80 cm	REF 66-22-080	1	150 cm	REF 66-22-150	1			

Tubos de respiración 9 mm D.I. para niños

Reutilizable


Informaciones de pedido

Conectores vulcanizados de 10 mm D.I. en ambos extremos /

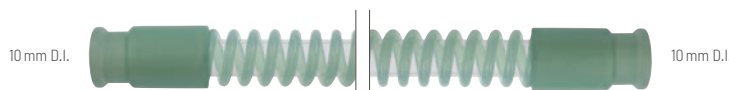


Longitud	Color: verde	Box	Longitud	Color: verde	Box	Longitud	Color: verde	Box
25 cm	REF 66-10-025	1	85 cm	REF 66-10-085	1	150 cm	REF 66-10-150	1
45 cm	REF 66-10-045	1	110 cm	REF 66-10-110	1	200 cm	REF 66-10-200	1
60 cm	REF 66-10-060	1	130 cm	REF 66-10-130	1			

Conectores vulcanizados de 10 mm D.I. / 22 mm D.I. /

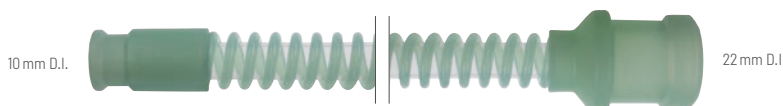

Longitud	Color: verde	Box	Longitud	Color: verde	Box	Longitud	Color: verde	Box
25 cm	REF 66-11-025	1	85 cm	REF 66-11-085	1	150 cm	REF 66-11-150	1
45 cm	REF 66-11-045	1	110 cm	REF 66-11-110	1	200 cm	REF 66-11-200	1
60 cm	REF 66-11-060	1	130 cm	REF 66-11-130	1			

Conectores vulcanizados de 22 mm D.I. en ambos extremos /

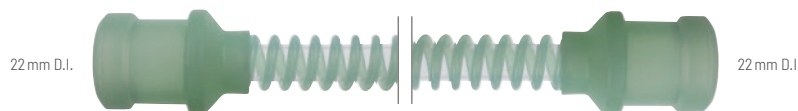

Longitud	Color: verde	Box	Longitud	Color: verde	Box	Longitud	Color: verde	Box
25 cm	REF 66-12-025	1	110 cm	REF 66-12-110	1	150 cm	REF 66-12-150	1
60 cm	REF 66-12-060	1	130 cm	REF 66-12-130	1	200 cm	REF 66-12-200	1
85 cm	REF 66-12-085	1						

Accesorios para tubos de respiración

Informaciones de pedido

Gancho / Para tubos de respiración 9 mm D.I. / 19 mm D.I., reutilizable

REF	Box
66-00-002	5



Circuito de anestesia para niños

Reutilizable

Informaciones de pedido

Circuito de anestesia /

2x Tubo de respiración de silicona, 9 mm D.I., conectores de 22 mm / 10 mm D.I., 110 cm largo
 1x Tubo de respiración de silicona, 9 mm D.I., conectores de 22 mm / 22 mm D.I., 110 cm largo
 1x Conector en Y en ángulo para niños, estándar, giratorio, 15 mm D. I. / 22 mm D. E. - 10 mm D.E.
 1x Conector recto
 1x Bolsa reservorio de silicona de 500 ml

REF	Box
62-11-200	1



Bolsas reservorio

Reutilizable

Informaciones de pedido

Estándar conector de 22 mm D.I. y anillo de fijación /

Tamaño	REF	Box
500 ml	66-00-011	1
1000 ml	66-00-015	1
1500 ml	66-00-012	1
2300 ml	66-00-013	1
3000 ml	66-00-014	1

22 mm D.I.



Tubo abierto con tapón, conector de 22 mm D.I. y anillo de fijación /

Tamaño	REF	Box
500 ml	66-00-041	1
1000 ml	66-00-045	1
1500 ml	66-00-042	1
2300 ml	66-00-043	1
3000 ml	66-00-044	1

22 mm D.I.

Tubo de conexión y tapón



Orificio de 5 mm, conector de 22 mm D.I. y anillo de fijación /

Tamaño	REF	Box
500 ml	66-00-441	1
1000 ml	66-00-445	1
1500 ml	66-00-442	1
2300 ml	66-00-443	1
3000 ml	66-00-444	1

22 mm D.I.

Orificio 5 mm



Trampas de agua

Reutilizable

Informaciones de pedido

Trampa de agua / Adultos,
 15 mm D.I. / 22 mm D.E.,
 contenedor de 55 ml

REF	Box
66-40-500	6

15 mm D.I.
22 mm D.E.



55 ml

15 mm D.I.
22 mm D.E.

Trampa de agua / Niños, con cone-
 ciones tubo 10 mm D.E.,
 contenedor de 55 ml

REF	Box
66-40-510	6

10 mm D.E.

10 mm D.E.



55 ml

/ Tubos corrugados

Reutilizable

Informaciones de pedido

Conector recto /

Longitud: 13 cm	Longitud: 20 cm	Box
REF 65-50-130	REF 65-50-200	10

Longitud: 13 cm	Longitud: 20 cm	Box
REF 65-55-130	REF 65-55-200	10

Conector en ángulo recto, giratorio /

Longitud: 13 cm	Longitud: 20 cm	Box
REF 65-60-130	REF 65-60-200	10

Longitud: 13 cm	Longitud: 20 cm	Box
REF 65-80-130	REF 65-80-200	10


Conector en ángulo recto, doble giratorio con tapón para la broncoscopia y la aspiración /

Longitud: 13 cm	Longitud: 20 cm	Box
REF 65-68-130	REF 65-68-200	10

Longitud: 13 cm	Longitud: 20 cm	Box
REF 65-88-130	REF 65-88-200	10

Tubo de conexión /

Longitud: 13 cm	Longitud: 20 cm	Box
REF 65-00-130	REF 65-00-200	10

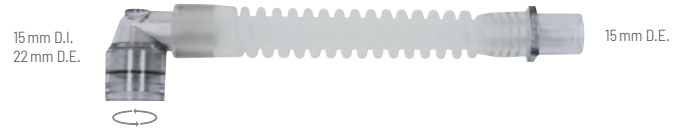

/ Tubos corrugados

De un solo uso, estéril

Informaciones
de pedido

Conector recto /

Longitud: 15 cm Box

REF 60-50-150-1 25

Longitud: 15 cm Box

REF 60-55-150-1 20

Conector recto giratorio /

Longitud: 15 cm Box

REF 60-52-150-1 25

Conector en ángulo recto, giratorio /

Longitud: 15 cm Box

REF 60-60-150-1 25

Longitud: 15 cm Box

REF 60-80-150-1 20

Conector en ángulo recto, giratorio con tapón para la broncoscopia y la aspiración /

Longitud: 15 cm Box

REF 60-65-150-1 25

Longitud: 15 cm Box

REF 60-85-150-1 20









Conector en ángulo recto, doble giratorio con tapón para la broncoscopia y la aspiración /

Longitud: 15 cm Box

REF 60-68-150-1 25

Longitud: 15 cm Box

REF 60-88-150-1 20

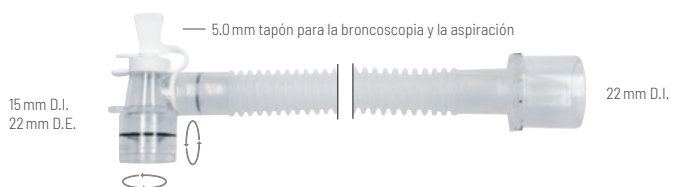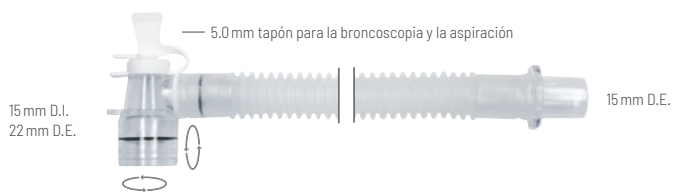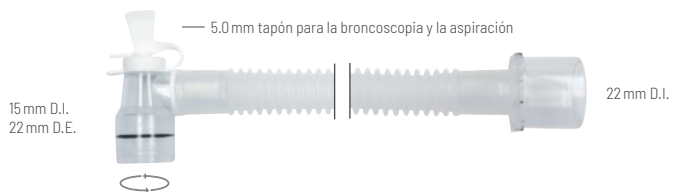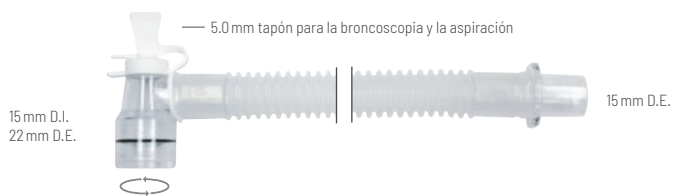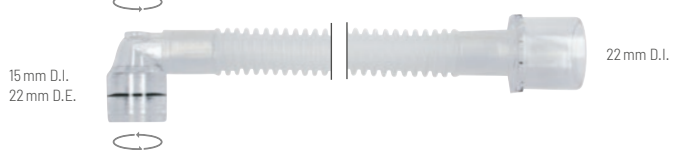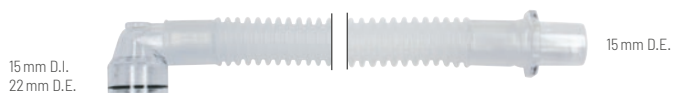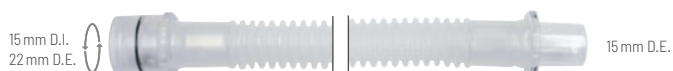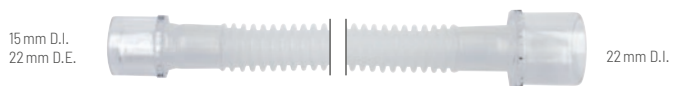

/ Conectores rectos

Reutilizable

Informaciones de pedido

REF	Box
60-30-002	10



REF	Box
60-30-003	10



REF	Box
60-30-005	10



REF	Box
60-40-002	10



REF	Box
60-40-003	10



REF	Box
60-40-005	10



REF	Box
60-12-110	10



REF	Box
60-12-400	10



REF	Box
60-12-200	10



REF	Box
60-12-201	10



REF	Box
60-50-002	10



REF	Box
60-50-005	10



REF	Box
60-50-003	10




REF	Box
60-12-300	10



REF	Box
60-12-601	10



REF	Box
60-71-002	10

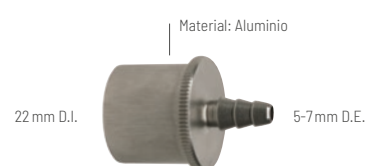

Conectores en ángulo recto

Reutilizable

Informaciones de pedido

REF	Box	REF	Box
60-65-002	10	60-65-004	10



Conectores en ángulo recto, giratorio

Reutilizable

Informaciones de pedido

REF	Box	REF	Box	REF	Box
60-60-002	10	60-60-004	10	60-60-010	10



REF	Box	REF	Box	REF	Box
60-60-005	10	60-60-205	10	60-60-305	10



Conectores en ángulo recto, giratorio

De un solo uso, estéril

Informaciones de pedido

REF	Box	REF	Box	REF	Box
60-60-222-1	10	60-60-555-1	10	60-60-111-1	10



Tube Inhaler

Reutilizable

Informaciones de pedido

Para la aplicación de aerosoles para pacientes intubados.

REF	Box
60-60-009	10



REF	Box
60-65-009	10



REF	Box
60-60-209	10



REF	Box
60-67-009	10




Conectores acodados

Reutilizable

Informaciones de pedido

Reutilizable	De un solo uso	Box
REF 60-12-000	REF 60-13-000	10

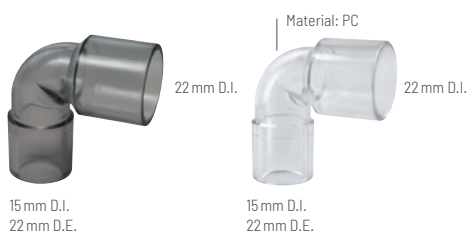

REF	Box
60-12-001	10



REF	Box
60-12-006	10



Conectores en Y recto

Reutilizable

Informaciones de pedido


REF	Box
60-10-100	10




REF	Box
60-11-200	10



REF	Box
60-11-203	10

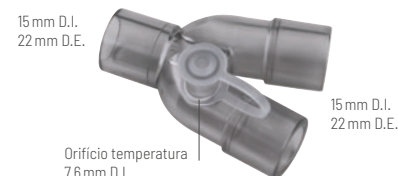

REF	Box
60-11-204	10

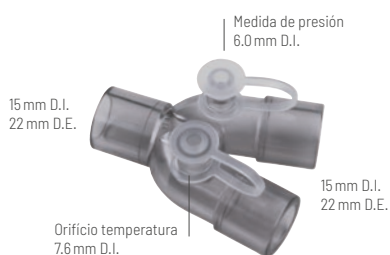

REF	Box
60-11-400	10



REF	Box
60-11-420	10



Conector en Y ángulo recto

Reutilizable

Informaciones de pedido

REF	Box
60-11-300	10



Conectores en Y recto para niños


Reutilizable

Informaciones de pedido

REF	Box
60-20-500	10



REF	Box
60-20-501	10

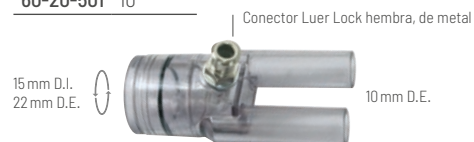

Conectores en Y ángulo recto para niños


Reutilizable

Informaciones de pedido

REF	Box
60-20-100	10



REF	Box
60-20-101	10

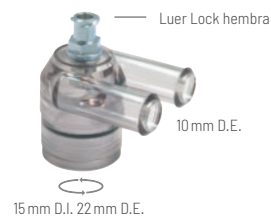

Conectores en T

Reutilizable

Informaciones de pedido

REF	Box
60-11-500	10




REF	Box
60-11-503	10



REF	Box
60-11-506	10



REF	Box
60-11-510	10

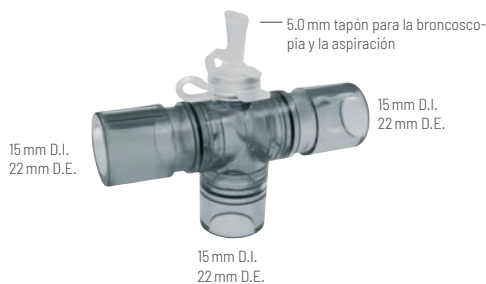

Tubos de conexión para niños

Reutilizable

Informaciones de pedido

Longitud: 9.0 cm	Box
REF 65-00-090	10



Longitud: 10.5 cm	Box
REF 65-00-105	10



Accesorios para conectores

Informaciones de pedido

Aspirador de meconio / De un solo uso

REF	Box
49-30-000	10



- Conexión de 15 mm D.I. permite la conexión directa a un tubo traqueal para la aspiración de meconio en recién nacidos
- Conexión cónica para sonda de aspiración

Informaciones de pedido

Llave de desconexión / Reutilizable

REF	Box
60-60-999	10



Tubo de medición de gas / De un solo uso, no estéril

Versión	Longitud	REF	Box
1,5 mm D.I. / 3,0 mm D.E. con dos conectores Luer Lock macho	150 cm	61-99-150	10
1,5 mm D.I. / 3,0 mm D.E. con dos conectores Luer Lock macho	200 cm	61-99-200	10
1,5 mm D.I. / 3,0 mm D.E. con dos conectores Luer Lock macho	300 cm	61-99-300	10




/ Tubo de silicona

Biocompatibilidad probada y certificada según USP Clase VI. (sin marcado CE)

Informaciones
de pedido

Tubo de silicona / Color: transparente

D.I. (mm)	C (mm)	D.E. (mm)	REF	Box
1.0	0.5	2.0	68-010-05	25 m
1.0	1.0	3.0	68-010-10	25 m
1.5	0.75	3.0	68-015-075	25 m
2.0	1.0	4.0	68-020-10	25 m
3.0	1.0	5.0	68-030-10	25 m
3.0	1.5	6.0	68-030-15	25 m
4.0	1.0	6.0	68-040-10	25 m
4.0	1.5	7.0	68-040-15	25 m
4.0	2.0	8.0	68-040-20	25 m
5.0	1.0	7.0	68-050-10	25 m
5.0	1.5	8.0	68-050-15	25 m
5.0	2.0	9.0	68-050-20	25 m
6.0	1.0	8.0	68-060-10	25 m
6.0	1.5	9.0	68-060-15	25 m
6.0	2.0	10.0	68-060-20	25 m
6.0	3.0	12.0	68-060-30	25 m
7.0	1.5	10.0	68-070-15	25 m
7.0	2.0	11.0	68-070-20	25 m
7.0	3.0	13.0	68-070-30	25 m
8.0	2.0	12.0	68-080-20	25 m
8.0	3.0	14.0	68-080-30	25 m
9.0	2.0	13.0	68-090-20	25 m
10.0	2.0	14.0	68-100-20	25 m
10.0	3.0	16.0	68-100-30	25 m
12.0	3.0	18.0	68-120-30	25 m
12.0	4.0	20.0	68-120-40	25 m

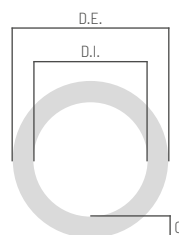

Classic Infusor

Para la infusión a presión, irrigación, transfusión y la medición invasiva de la presión arterial



Versión de 500 ml y de 1000 ml

Con doble gancho, permite la fijación de diferentes formas de las bolsas de suero.

- Administración rápida de una solución de infusión para compensar las deficiencias de fluidos/volumen
- Control de la presión y el lavado del sistema de tubos durante la medición invasiva de la presión arterial
- Transfusión

Versión 3000 / 5000 ml

Con cremallera, permite la inserción de diferentes formas de las bolsas de suero.

- Administra grandes cantidades de líquido para la irrigación del campo quirúrgico

El material de poliamida del Classic Infusor permite una fácil limpieza y desinfección. El material de malla transparente proporciona una visión clara de la bolsa de suero y el nivel del contenido. Con código UDI para la trazabilidad del producto.



Características




Pera de inflado con llave de tres vías

- Pera de inflado ergonómica
- Llave de tres vías para el desinflado rápido a la hora de cambiar la bolsa de suero



Manómetro

- Rango de presión de 0 - 300 mmHg en intervalos de 10 mmHg
- Robusto y resistente para un control preciso de la presión

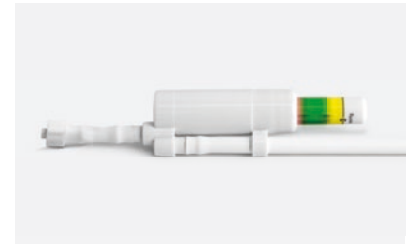

Indicador de presión con código de color

- Indicador de presión con 360° de visión facilita el control de la presión
- Válvula de sobrepresión para evitar una presión excesiva

Informaciones de pedido

Classic Infusor / Reutilizable

Versión	500 ml	1000 ml	3000 / 5000 ml	Box
Con pera de inflado, llave de tres vías y indicador de presión con código de color	REF 58-02-050	REF 58-02-100	-	1
Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro	REF 58-08-050	REF 58-08-100	REF 58-08-300	1
Con conexión Luer Lock	-	-	REF 58-01-300	1

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Folleto

Clear Infusor

Para la infusión a presión, irrigación, transfusión y la medición invasiva de la presión arterial



Versión de 500 ml y de 1000 ml

- Administración rápida de una solución de infusión para compensar las deficiencias de fluidos/volumen
- Control de la presión y el lavado del sistema de tubos durante la medición invasiva de la presión arterial
- Transfusión

Versión 3000 ml

- Administra grandes cantidades de líquido para la irrigación del campo quirúrgico

El diseño único permite la fijación de las bolsas de suero comunes y una distribución uniforme de la presión. La superficie lisa del material de PU hace que el Clear Infusor sea fácil de limpiar y desinfectar. El material transparente proporciona una visión clara de 360° de la bolsa de suero, así como el nivel del contenido. Con código UDI para la trazabilidad del producto.



Características




Pera de inflado con llave de tres vías

- Pera de inflado ergonómica
- Llave de tres vías para el desinflado rápido a la hora de cambiar la bolsa de suero



Manómetro

- Rango de presión de 0 - 300 mmHg en intervalos de 10 mmHg
- Robusto y resistente para un control preciso de la presión

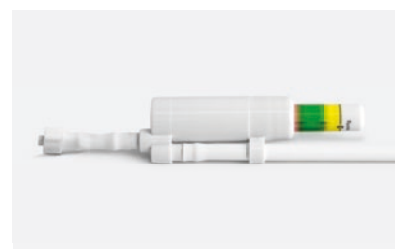

Indicador de presión con código de color

- Indicador de presión con 360° de visión facilita el control de la presión
- Válvula de sobrepresión para evitar una presión excesiva

Informaciones de pedido

Clear Infusor / Reutilizable

Versión	500 ml	1000 ml	3000 ml	Box
Con pera de inflado, llave de tres vías y indicador de presión con código de color	REF 57-02-050	REF 57-02-100	-	1
Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro	REF 57-08-050	REF 57-08-100	REF 57-08-300	1
Con conexión Luer Lock	-	-	REF 57-01-300	1

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Folleto

/ Dispo Infusor

For pressure infusion, irrigation, transfusion and invasive blood pressure monitoring



Versión de 500 ml y de 1000 ml

Con cinta de gancho, para la fijación ajustable de las diferentes bolsas de suero.

- Administración rápida de una solución de infusión para compensar las deficiencias de fluidos/volumen
- Control de la presión y el lavado del sistema de tubos durante la medición invasiva de la presión arterial
- Transfusión

Versión 3000 ml

Con gancho, para la fijación ajustable de las diferentes bolsas de suero.

- Administra grandes cantidades de líquido para la irrigación del campo quirúrgico

El material de malla transparente proporciona una visión clara de la bolsa de suero y el nivel del contenido.




Características



Pera de inflado con llave de tres vías

- Pera de inflado ergonómica
- Llave de tres vías para el desinflado rápido a la hora de cambiar la bolsa de suero

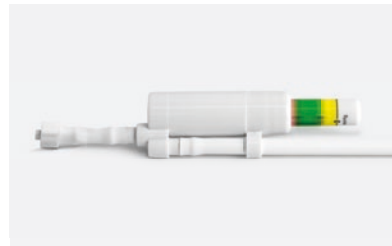

Indicador de presión con código de color

- Indicador de presión con 360° de visión facilita el control de la presión
- Válvula de sobrepresión para evitar una presión excesiva

Informaciones de pedido

Dispo Infusor / Para el uso en un solo paciente

Versión	500 ml	1000 ml	3000 ml	Box
Con pera de inflado, llave de tres vías y indicador de presión con código de color	REF 56-02-050	REF 56-02-100	REF 56-02-300	5
Con conexión Luer Lock	-	-	REF 56-01-300	5

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Folleto

/ Accesorios para bolsas de infusión a presión

Informaciones de pedido

Pera de inflado / Reutilizable

Con indicador de presión codificado y llave de tres vías	Con llave de tres vías	Box
REF 51-02-666	REF 51-03-666	1



Con indicador de presión codificado y llave de tres vías



Con llave de tres vías

Manómetro 300 mmHg / Comprobado, para la fijación a la bolsa de infusión, reutilizable

REF	Box
20-17-301	1



Soporte con tubo flexible

Ajustable en altura, longitud del soporte: 38 cm

Informaciones de pedido

	Fijador de tubo	Fijador de tubo, giratorio	Fijador de tubo, doble, con auto cierre	Fijador doble	Box
Garra para riel estándar	REF 73-512-04	REF 73-512-14	REF 73-512-44	REF 73-512-23	1
Garra universal	REF 73-532-04	REF 73-532-14	REF 73-532-44	REF 73-532-23	1



Soporte con tres articulaciones

Fijación de las tres articulaciones con una sola llave

Informaciones de pedido

Con garra universal y fijador de tubo / Disponible en dos longitudes

Longitud	Fijador de tubo	Fijador de tubo, doble, con auto cierre	Box
30 cm	REF 70-131-04	REF 70-131-44	1
50 cm	REF 70-231-04	REF 70-231-44	1



Soporte con tres articulaciones

Fijación de las tres articulaciones con una sola llave

Informaciones de pedido

Con garra universal y soporte para los fijadores de transductores de presión / Disponible en dos longitudes

Longitud	REF	Box
30 cm	70-131-07	1
50 cm	70-231-07	1



/ Tube-Tray

Sistema de fijación para tubos de respiración para adultos y niños



- Varios orificios que se adaptan perfectamente a tubos de respiración de diferentes tallas y materiales
- También incluye orificios para tubos de conexión para la medición de gases
- No contiene ningún material ferromagnético (excepto el Tube-Tray con garra)
- Colocamiento versátil por detrás o de lado del paciente
- Absorbe la presión sobre la cara del paciente

Informaciones de pedido

Tube-Tray recto /

REF	Box
77-10-000	1



Tube-Tray rectangular /

REF	Box
77-20-000	1



Tube-Tray con garra para riel /

REF	Box
77-00-020	1



/ Soportes para transductores de presión

Para fijadores de transductores de presión y llaves de tres vías

Informaciones de pedido

Soporte para llaves de tres vías /

REF	Box
78-10-000	1




Soporte estándar /

REF	Box
78-20-000	1



Soporte universal con una articulación /

REF	Box
78-30-000	1

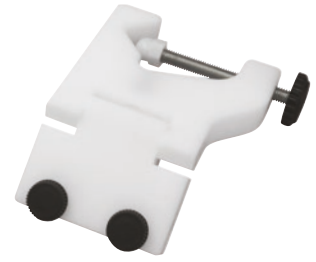



Conectores con cierre rápido

Informaciones de pedido

REF	Box
SLZM30	5

REF	Box
SLZM40	5

REF	Box
SLZM50	5

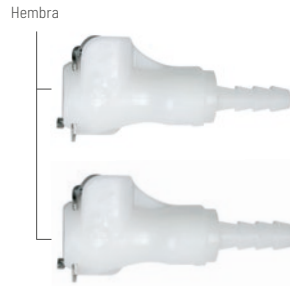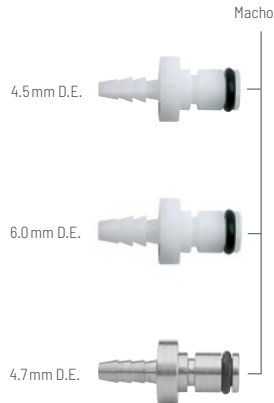

REF	Box
SLZF30	5

REF	Box
SLZF40	5

Conectores Luer Lock

Informaciones de pedido

REF	Box
CHLLM05	5



REF	Box
CHLLM06	5

REF	Box
CHLLM30	5

REF	Box
CHLLM40	5

REF	Box
CHLLMB20	5

REF	Box
CHLLMB30	5

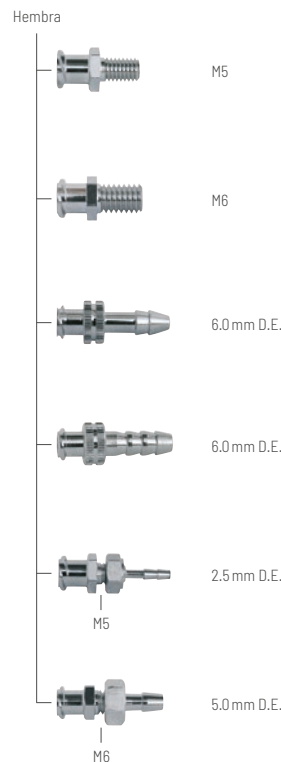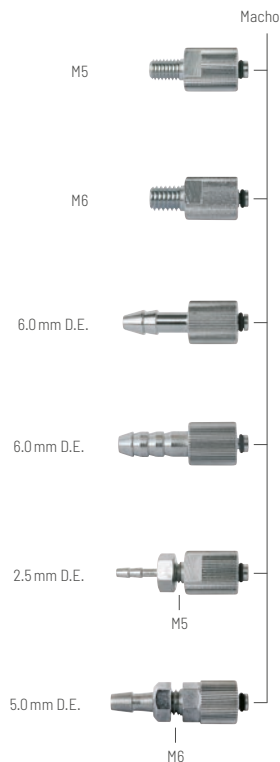

REF	Box
CHLLF05	5

REF	Box
CHLLF06	5

REF	Box
CHLLF30	5

REF	Box
CHLLF40	5

REF	Box
CHLLFB20	5

REF	Box
CHLLFB30	5

A		M	
Accesorios para bolsas de infusión a presión	19	Manómetro 300 mmHg para bolsas	
Accesorios para conectores	14	de infusión a presión	19
Accesorios para tubos de respiración	6	Mordedor	5
Accesorios para ventilación	7	P	
Aspirador de meconio	14	Pera de inflado para bolsas de infusión a presión	19
B		S	
Bolsas reservorio	7	Soporte con tres articulaciones	20
C		Soporte con tubo flexible	20
Círculo de anestesia para niños	7	Soporte estándar	21
Classic Infusor	16	Soporte para llaves de tres vías	21
Clear Infusor	17	Soportes	20 - 21
Collarín de traqueostomía	4	Soportes para transductores de presión	21
Collarín de traqueostomía, ajustable	4	Soporte universal con una articulación	21
Conector en Y ángulo recto	13	T	
Conectores	10 - 14	Trampas de agua	7
Conectores acodados	12	Tube Inhaler	12
Conectores con cierre rápido	22	Tube-Tray	21
Conectores de tubos	22	Tube-Tray con garra para riel	21
Conectores en ángulo recto	11	Tube-Tray rectangular	21
Conectores en ángulo recto, giratorio	11	Tube-Tray recto	21
Conectores en T	14	Tubo de conexión	8
Conectores en Y ángulo recto para niños	13	Tubo de medición de gas	14
Conectores en Y recto	13	Tubo de respiración para adultos	6
Conectores en Y recto para niños	13	Tubo de silicona	15
Conectores Luer Lock	22	Tubos corrugados	8 - 9
Conectores rectos	10	Tubos de conexión para niños	14
D		Tubos de respiración	6
Dispo Infusor	18	Tubos de respiración para niños	6
E			
Endotape	4		
F			
Fijaciones para tubos	4 - 5		
Fijador de tubo	5		
G			
Gancho	6		
I			
Infusión a presión	16 - 19		
L			
Llave de desconexión	14		



VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1
72172 Sulz a. N.
Germany
Tel.: +49 7454 9596-0
Fax: +49 7454 9596-33
e-mail: sales@vbm-medical.de
www.vbm-medical.de

Para más información sobre nuestra gama completa de productos visite nuestra página web, ahí encontrarán nuestra mediateca con informaciones adicionales como videos, folletos, etc.

Síguenos en Redes Sociales:

