

Konische und gerade Form

Platzsparende Verpackung

Flaches Profil



Tourniquet Dispo Cuff

Blutsperremanschette, zum Einmalgebrauch

/ Tourniquet Dispo Cuff

Tourniquet Dispo Cuff ist eine sterile Blutsperremanschette zum Einmalgebrauch, die sich besonders für kontaminierte Anwendungen eignet und Schutz vor nosokomialer Infektion bietet. Die Manschette ist erhältlich in gerader Form (für kleine oder mittlere obere Extremitäten) und in konischer Form (hauptsächlich für konische, untere Extremitäten) und wird in verschiedenen Größen angeboten, die zur optimalen Manschettenauswahl farbkodiert sind.

Eigenschaften




Cuff-Design

- Flaches Profil und leichtes Gewicht
- Großer Klettverschluss zur sicheren Fixierung der Manschette
- Farbkodiert für einfache Größen- und Manschettenauswahl
- Schlauch aus knickfestem Silikonmaterial
- Konische und gerade Form
- PVC-frei



Verpackung

- In Spenderbox verpackt
- Einfache Lagerung durch flache Verpackung

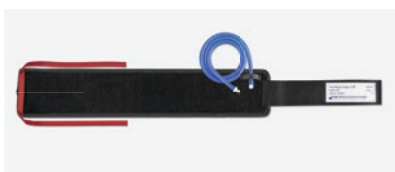

Gerade Form

- Zylindrisches Design
- Kein Unterschied im Durchmesser zwischen proximalem und distalem Manschettenrand



Konische Form

- Konisches Design mit kleinerem distalem als proximalem Durchmesser bei der Verwendung
- Blockt den Blutfluss bei niedrigerem Druck durch die verbesserte Anpassung an die Extremität
- Integrierte Kunststoffeinlage, um das Verrutschen der Manschette zu verhindern



Doppelmanschette für intravenöse Regionalanästhesie (IVRA)

- Doppelmanschette mit zwei individuell belüftbaren Blasen

Bestell- information

Tourniquet Dispo Cuff / Einfachmanschette, zum Einmalgebrauch, steril

Länge	Breite	Farbe	Ein Anschluss	Box
20 cm	5 cm	-	REF 20-34-700SLZ-1	10
30 cm	6 cm	■	REF 20-34-710SLZ-1	10
35 cm	8 cm	■	REF 20-34-711SLZ-1	10
46 cm	10 cm	■	REF 20-34-712SLZ-1	10
46 cm	12 cm	■	REF 20-34-715SLZ-1*	10
61 cm	12 cm	■	REF 20-34-722SLZ-1*	10
76 cm	12 cm	■	REF 20-34-727SLZ-1*	10
86 cm	12 cm	■	REF 20-34-728SLZ-1*	10
107 cm	12 cm	■	REF 20-34-729SLZ-1*	10

Tourniquet Dispo Cuff / Doppelmanschette, zum Einmalgebrauch, steril

Länge	Breite	Farbe	REF	Box
30 cm	12 cm	■	20-30-710SLZ-1	10
46 cm	15 cm	■	20-30-712SLZ-1	10
61 cm	15 cm	■	20-30-722SLZ-1	10

*Konische Form

Verlängerungsschlauch / Zum Einmalgebrauch, steril

Länge	REF	Box
100 cm	20-39-100-1	5

Die Medizinprodukte in diesem Werbemittel sind hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet. Die Medizinprodukte in diesem Werbemittel enthalten keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.