

Forma recta y cónica

Código UDI y número de serie

Perfil plano



Tourniquet Wipe Cuff

Manguito, reutilizable mediante desinfección manual con toallitas

/ Tourniquet Wipe Cuff


El Tourniquet Wipe Cuff es un manguito reutilizable hecho de material altamente resistente y adecuado para la reutilización después de la desinfección. El manguito está disponible en forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas), en forma cónica (principalmente para extremidades inferiores cónicas) y en diferentes tamaños con un código de color, para la selección óptima del manguito.

Características




Diseño manguito

- Perfil plano y liviano
- Cierre adhesivo grande para una fijación segura del manguito
- Código de colores para facilitar la selección del tamaño y del manguito
- Tubo hecho de silicona, resistente a torceduras
- Forma cónica y recta
- Libre de PVC

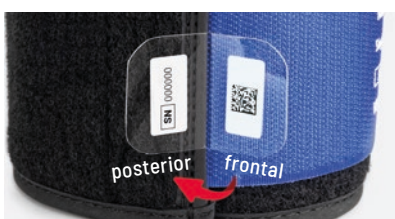

Características especiales

- El material interior especial se seca rápidamente después de limpiarlo con desinfectante y permite reutilizar el producto en el momento oportuno
- Código UDI para la trazabilidad del producto
- Número de serie para el seguimiento de las aplicaciones
- Reprocesable hasta 100 veces (por desinfección)

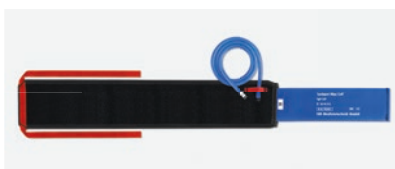


Forma recta

- Diseño cilíndrico
- No hay diferencia de diámetro entre el borde distal y el proximal



Forma cónica

- Diseño cónico con un diámetro distal más pequeño que el proximal durante el uso
- Bloquea el flujo de sangre a una presión más baja a través de un ajuste mejorado a la extremidad
- La placa de plástico integrada evita el deslizamiento del manguito

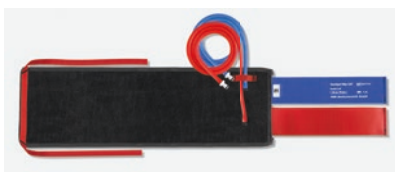

Manguito doble para la anestesia regional intravenosa (ARIV)

- Manguito doble con dos cámaras inflables individualmente

Informaciones de pedido

Tourniquet Wipe Cuff / Manguito simple, reutilizable

Longitud	Anchura	Color	REF	Box
20 cm	7 cm	□	20-75-700	1
30 cm	8 cm	■	20-75-710	1
35 cm	8 cm	■	20-75-711	1
46 cm	10 cm	■	20-75-712	1
46 cm	12 cm	■	20-75-715*	1
61 cm	12 cm	■	20-75-722*	1
76 cm	12 cm	■	20-75-727*	1
86 cm	12 cm	■	20-75-728*	1
107 cm	12 cm	■	20-75-729*	1

Tourniquet Wipe Cuff / Manguito doble, reutilizable

Longitud	Anchura	Color	REF	Box
30 cm	12 cm	■	20-77-710	1
46 cm	15 cm	■	20-77-712	1
61 cm	15 cm	■	20-77-722	1

*Forma cónica

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.