

Robust und langlebig

UDI-Code

Latexfrei



Classic Infusor

Druckinfusionsmanschette, wiederverwendbar

Classic Infusor

500 ml und 1000 ml Version

Mit Doppelhaken, ermöglicht die Fixierung unterschiedlicher Passformen von Flüssigkeitsbeutel.

- Schnelle Verabreichung einer Infusionslösung zum Ausgleich von Flüssigkeits-/Volumenmangel
- Drucküberwachung und Spülung des Schlauchsystems bei invasiver, arterieller Blutdruckmessung
- Transfusion

3000 / 5000 ml Version

Mit Reißverschluss, ermöglicht das Einlegen unterschiedlicher Passformen von Flüssigkeitsbeutel.

- Verabreichung großer Flüssigkeitsmengen zur Spülung des Operationsfeldes

Das Polyamidmaterial des Classic Infusors ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion. Transparentes Netzmaterial bietet eine klare Sicht auf Flüssigkeitsbeutel und Flüssigkeitsstand. Mit UDI-Code für die Rückverfolgbarkeit des Produktes.

Eigenschaften




Handgebläse mit Dreivegehahn

- Ergonomisches Handgebläse zum Belüften
- Dreivegehahn zum schnellen Entlüften bei Wechsel des Flüssigkeitsbeutels



Manometer

- Druckbereich von 0 - 300 mmHg in 10 mmHg Skalierung
- Robust und langlebig zur präzisen Drucküberwachung

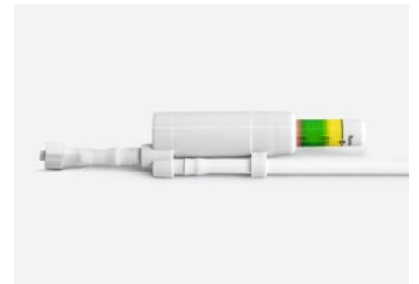

Farbkodierte Druckanzeige

- 360° Druckanzeige erleichtert die Drucküberwachung
- Überdruckventil zur Vermeidung von zu hoher Belüftung



Bestell- information

Classic Infusor / Wiederverwendbar

Ausführung	500 ml	1000 ml	3000 / 5000 ml	Box
Mit Handgebläse, Dreivegehahn und farbkodierter Druckanzeige	REF 58-02-050	REF 58-02-100	-	1
Mit Handgebläse, Dreivegehahn und Manometer	REF 58-08-050	REF 58-08-100	REF 58-08-300	1
Mit Luer Lock Anschluss	-	-	REF 58-01-300	1

Zusatz- information



Anwendungsvideo

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.