

Réduit le risque de contamination

Sans latex



Dispo Infusor

Manchette à pression, pour patient unique

/ Dispo Infusor

Version 500 ml et 1000 ml

Avec fixation par lanière, pour une fixation ajustable selon les différentes configurations de poches de fluide.

- Administration rapide d'une solution de perfusion pour compenser un déficit en liquide/volume
- Contrôle de la pression et rinçage du système de tubulure pendant la surveillance invasive de la pression artérielle
- Transfusion

Version 3000 ml

Avec crochet, pour une fixation facile de la plupart des configurations de poches de fluide.

- Administration de grands volumes de fluide pour l'irrigation du champ opératoire


Filet transparent pour une vue claire sur la poche de fluide et son niveau.

Caractéristiques



Poire de gonflage avec robinet à trois voies

- Poire ergonomique pour le gonflage manuel
- Robinet d'arrêt à trois voies pour un dégonflage rapide lors du changement de la poche de fluide

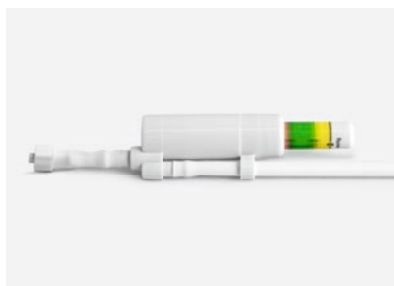

Indicateur de pression avec code couleur

- L'indicateur de pression à 360° facilite le contrôle de la pression
- Soupape de surpression pour éviter le surgonflage



Informations pour commander

Dispo Infusor / Patient unique

Version	500 ml	1000 ml	3000 ml	Box
Avec poire de gonflage, robinet à trois voies et indicateur de pression à code couleur	REF 56-02-050	REF 56-02-100	REF 56-02-300	5
Avec connexion Luer Lock	-	-	REF 56-01-300	5

Information supplémentaire



Vidéo d'application

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.