

Réutilisable

Faible impact environnemental

Code UDI et numéro de série



Bi-Masque

Masque facial d'anesthésie, durable et de forme anatomique


Bi-Masque

Le Bi-Masque est un masque facial en silicone avec une coque plastique intégrée. Cela favorise une prise en main confortable, car le masque est malléable tout en assurant une stabilité sans s'affaisser. Grâce à sa forme anatomique, le Bi-Masque assure une excellente étanchéité avec une pression minimale des tissus et sa conception ergonomique permet une maîtrise optimisée grâce à la prise en C. Le Bi-Masque est disponible en 5 tailles et retraitable jusqu'à 100 fois (autoclavable à 134°C).

Caractéristiques



Analyse de cycle de vie

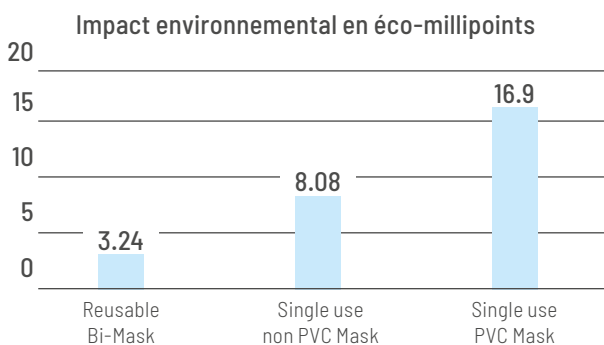

Life Cycle Assessment (LCA) - September 2025 based on ISO 14040/14044 standards. Centre for Sustainable Healthcare, Amsterdam UMC

Informations pour commander

Bi-Masque / Réutilisable

Taille	Patient	Connexion	Couleur	REF	Qté / Box
2	Enfant, petit	D.I. 22 mm	■	35-65-222	1
3	Enfant, grand	D.I. 22 mm	■	35-65-223	1
4	Adulte, petit	D.I. 22 mm	■	35-65-224	1
5	Adulte, moyen	D.I. 22 mm	■	35-65-225	1
6	Adulte, grand	D.I. 22 mm	■	35-65-226	1

Lanière de fixation / Réutilisable

Patient	REF	Qté / Box
Enfant	35-70-155	10
Adulte	35-70-255	10

Lanière de fixation / Usage unique

Patient	REF	Qté / Box
Adulte	35-30-255	10

Anneau crochet / Réutilisable

REF	Qté / Box
88-60-266	10

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.