

Forma cónica y recta

Cámara de silicona, fácil de limpiar – fácil de secar

Esterilización a vapor a 134°C

Código UDI y número de serie



Tourniquet Silicone Cuff

Manguito, reutilizable mediante reprocesamiento automático

Tourniquet Silicone Cuff

El Tourniquet Silicone Cuff es un manguito de torniquete reutilizable fabricado con material duradero y resistente y apto para un uso repetido tras su esterilización en autoclave de vapor a una temperatura de 134°C durante 5 minutos. El manguito está disponible en forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas), en forma cónica (principalmente para extremidades inferiores cónicas) y en diferentes tamaños con un código de color, para la selección óptima del manguito.

Características




Diseño manguito

- Cierre adhesivo grande para una fijación segura del manguito
- Código de colores para facilitar la selección del tamaño y del manguito
- Tubo hecho de silicona, resistente a torceduras
- Conector de metal con tapón de cierre
- Forma cónica y recta
- Libre de PVC




Características especiales

- Cámara de silicona, fácil de limpiar - fácil de secar
- Código UDI para la trazabilidad del producto
- Número de serie para el seguimiento de las aplicaciones
- Reprocesable hasta 50 veces (esterilización a vapor)

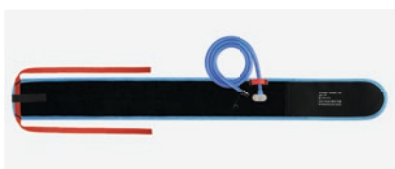


Forma recta

- Diseño cilíndrico
- No hay diferencia de diámetro entre el borde distal y el proximal

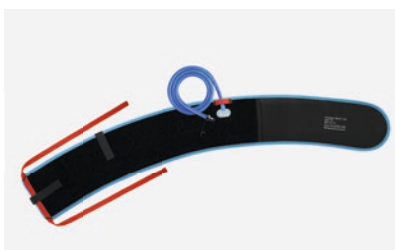

Forma cónica

- Diseño cónico con un diámetro distal más pequeño que el proximal durante el uso
- Bloquea el flujo de sangre a una presión más baja a través de un ajuste mejorado a la extremidad
- Diseño especial de la cámara (patrón ondulado) para evitar un desplazamiento del manguito

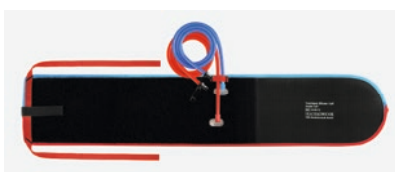

Manguito doble para la anestesia regional intravenosa (ARIV)

- Manguito doble con dos cámaras inflables individualmente

Informaciones de pedido

Tourniquet Silicone Cuff / Manguito simple, reutilizable, autoclavable

Longitud	Anchura	Color	REF	Box
20 cm	2.5 cm	-	20-64-700	1
30 cm	4.5 cm	■	20-64-710	1
35 cm	7.0 cm	■	20-64-611	1
46 cm	8.5 cm	■	20-64-612	1
46 cm	11.0 cm	■	20-64-512*	1
61 cm	11.0 cm	■	20-64-522*	1
76 cm	11.0 cm	■	20-64-527*	1
86 cm	11.0 cm	■	20-64-528*	1

Tourniquet Silicone Cuff / Manguito doble, reutilizable, autoclavable

Longitud	Anchura	Color	REF	Box
30 cm	8 cm	■	20-60-710	1
46 cm	12.5 cm	■	20-60-712	1
61 cm	12.5 cm	■	20-60-722	1

*Forma cónica

Tapón / Para Tourniquet Silicone Cuff, reutilizable

REF	Box
22-60-111	5

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.