

Forme conique et droite

Vessie en silicone, facile à essuyer - facile à sécher

Stérilisable à la vapeur à 134°C

Code UDI et numéro de série



Tourniquet Silicone Cuff

Brassard de garrot, réutilisable par retraitement en machine

Tourniquet Silicone Cuff

Tourniquet Silicone Cuff est un brassard de garrot réutilisable, fabriqué dans un matériau durable et résistant, qui convient à un usage répété après stérilisation à la vapeur par autoclave à une température de 134°C pendant 5 minutes.

Le brassard est disponible en forme droite (pour les extrémités supérieures de petite ou moyenne taille) et en forme conique (principalement pour les extrémités inférieures de forme conique) ainsi qu'en différentes tailles, qui sont codées par couleur pour une sélection optimale du brassard en fonction du patient.

Caractéristiques




Design du brassard

- Grande bande auto-agrippante pour une fixation fiable du brassard
- Code couleur permet de sélectionner les tailles et commander en toute sécurité
- Tube en silicone résistant à l'écrasement
- Raccord rapide en métal, capuchon inclus
- Forme conique et droite
- Sans PVC




Caractéristiques spéciales

- Vessie en silicone, facile à essuyer - facile à sécher
- Code UDI (Unique Device Identifier) pour la traçabilité du dispositif
- Numéro de série pour le suivi de l'utilisation du dispositif
- Peut être retraité jusqu'à 50 fois (stérilisation à la vapeur)

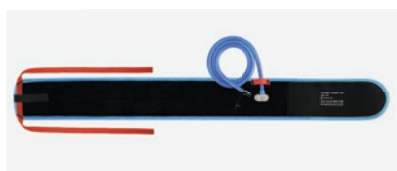


Forme droite

- Design cylindrique
- Ne présente aucune différence de diamètre entre les côtés proximal et distal

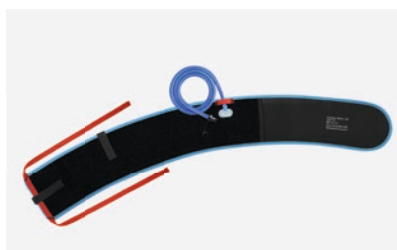

Forme conique

- Design conique avec un diamètre plus petit du côté distal que du côté proximal lors de l'application
- Bloque la circulation sanguine à une pression plus faible grâce à une meilleure adaptation aux extrémités
- Conception spécifique de la vessie (forme sinusoïdale) pour éviter la migration du brassard

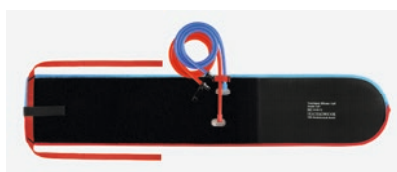

Brassard double pour anesthésie locorégionale intraveineuse (ALRIV)

- Brassard double avec 2 compartiments gonflables séparément

Informations pour commander

Tourniquet Silicone Cuff / Brassard simple, réutilisable, autoclavable

Longueur	Largeur	Couleur	REF	Box
20 cm	2.5 cm	-	20-64-700	1
30 cm	4.5 cm	■	20-64-710	1
35 cm	7.0 cm	■	20-64-611	1
46 cm	8.5 cm	■	20-64-612	1
46 cm	11.0 cm	■	20-64-512*	1
61 cm	11.0 cm	■	20-64-522*	1
76 cm	11.0 cm	■	20-64-527*	1
86 cm	11.0 cm	■	20-64-528*	1

Tourniquet Silicone Cuff / Brassard double, réutilisable, autoclavable

Longueur	Largeur	Couleur	REF	Box
30 cm	8 cm	■	20-60-710	1
46 cm	12.5 cm	■	20-60-712	1
61 cm	12.5 cm	■	20-60-722	1

*Forme conique

Bouchon / Pour Tourniquet Silicone Cuff, réutilisable

REF	Box
22-60-111	5

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.

Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.