

eFONA* in CICO Situation

Alle Komponenten in einem Set

Kompaktes Packmaß




Surgicric III

Set für die perkutane Punktionskoniotomie entsprechend der Seldinger Technik

Surgicric III

Surgicric III ist ein Set für die perkutane Punktionskoniotomie entsprechend der Seldinger Technik. Das Set ermöglicht eine Sicherung des Atemwegs im Falle einer Obstruktion der oberen Atemwege bzw. als „Ultima Ratio“, falls alle anderen Versuche den Patienten zu beatmen, gescheitert sind. Eine besondere Eigenschaft von Surgicric III ist die Kombination von Tubus und Dilatator. Der Dilatator ist bereits in den Tubus eingeführt, was eine schnelle und leichte Vorgehensweise erlaubt. In einer speziellen sterilen Instrumententasche verpackt, bietet das Set eine klare Übersicht über sämtliche Komponenten.

Anwendung

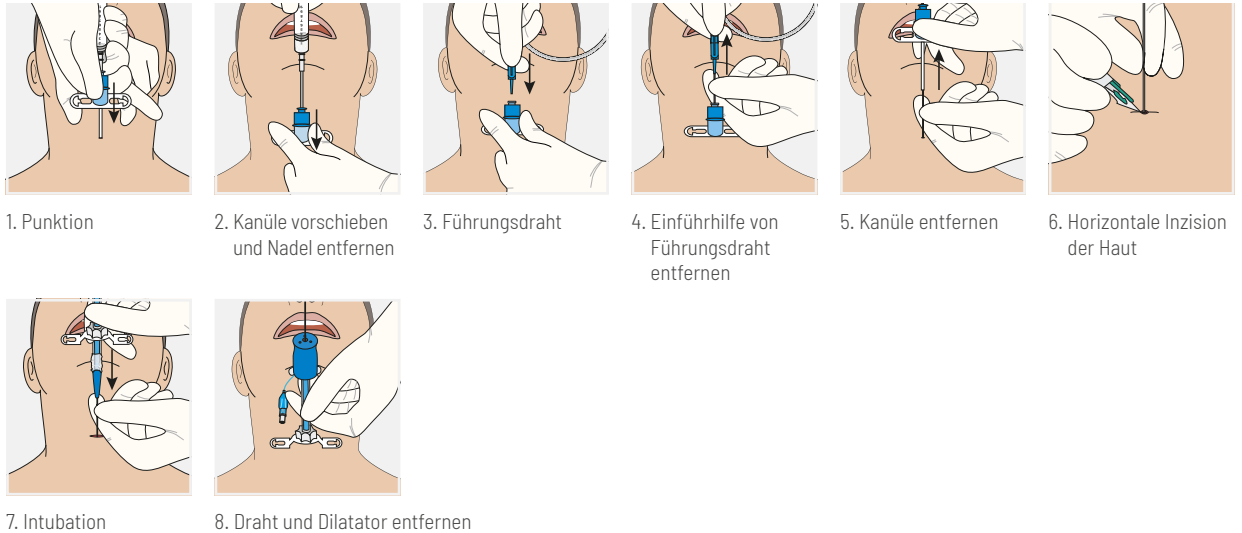

7. Intubation

8. Draht und Dilatator entfernen

Eigenschaften

Führungsdraht

- J-Spitze ermöglicht atraumatische Einführung
- 10 cm, 20 cm und 30 cm Markierung zur Orientierung der Einführtiefe

Halsband

- Sichere Fixation des Tubus

Dilatator


- Weiche Spitze, um Verletzung der hinteren Trachealwand zu vermeiden
- Sanfter Übergang zwischen Dilatator und Tubusspitze
- Verriegelungsmechanismus minimiert die Gefahr einer versehentlichen Dislokation des Dilatators vom Tubus

6.0 mm I.D. Tubus

- Cuff, zum Schutz vor Aspiration
- Verstellbarer Flansch
- Atraumatische, abgerundete Tubusspitze

Verlängerungsschlauch

- Mit Absaugmöglichkeit ≤ 16 Fr

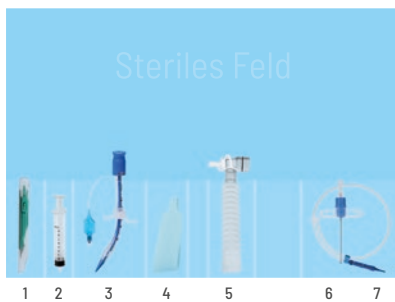

Inhalt

- 1 Skalpell # 11
- 2 Spritze 10 ml
- 3 6.0 mm I.D. Tubus mit Cuff und Dilatator
- 4 Halsband
- 5 Verlängerungsschlauch
- 6 Injektionskatheter (Nadel & Kanüle)
- 7 Führungsdraht

Robuste Verpackung und kompaktes Packmaß für Notfalltaschen, Rucksäcke, Notfallwagen, etc.

Packmaß:

31.5 cm (L) x 15.2 cm (B) x 5.0 cm (H)

Entfaltetes Maß / Steriles Feld:

56 cm (L) x 39 cm (B)

Bestellinformation

Surgicric III / Zum Einmalgebrauch, steril

REF	Box
30-08-227-1	1

Zusatzinformation



Anwendungsvideo



Flyer Koniotomie



Kommentierte Bibliografie

* emergency Front Of Neck Access

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.